

Bibliothèque numérique

medic@

**Drapier. [Catalogue de la maison
Drapier] : bandages herniaires,
ceintures - bas pour varices,
accessoires**

Paris, 1911.

Cote : 26543



(c) Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris)
Adresse permanente : <http://www.bium.univ-paris5.fr/hist/med/medica/cote?26543>

26543

26543

BANDAGES HERNIAIRES

CEINTURES - BAS POUR VARICES

ACCESSOIRES



EXPOSITION DE LONDRES 1906
HORS CONCOURS
EXPOSITION DE BRUXELLES 1910
GRAND PRIX

DRAPIER & FILS

41, Rue de Rivoli et Boulevard de Sébastopol, 7
PARIS (1^{er})

Téléphone } 3083-46
106-45

• • Succursale : 17, Avenue de l'Opéra • •

26543

Maison DRAPIER & FILS

FONDÉE EN 1829

VAN STEENBRUGGHE & BRETON, Successeurs

FOURNISSEURS DES HOPITAUX CIVILS ET MILITAIRES

Téléphone 106-45
3083-46

Récompenses aux Expositions de Paris 1855, 1867, 1878
* Liège 1905 * Milan 1906 * Saragosse 1908 *
Londres 1908 : Membre du Jury - HORS CONCOURS
* * Bruxelles 1910 : GRAND PRIX * *

Téléphone 106-45
3083-46



41 - Rue de Rivoli et Boulevard de Sébastopol - 7

OMNIBUS et TRAMWAYS : Station du Châtelet
* * * MÉTROPOLITAIN : Station du Châtelet

(à l'angle de ces deux voies)

PARIS (1^{er} Arrond^t)

ATELIERS : 41, Rue de Rivoli, à Paris * *
et 23 bis, Avenue de Paris, à Choisy-le-Roi (Seine)

26543

SUCCURSALE : 17, Avenue de l'Opéra

Envoi sur demande de nos Catalogues :
1^{re} Partie : INSTRUMENTS DE CHIRURGIE — MOBILIER CHIRURGICAL
2^e — ORTHOPÉDIE — PROTHÈSE — APPAREILS POUR FRACTURES
3^e — LITS MÉCANIQUES — APPAREILS POUR MALADES ET BLESSÉS
4^e — MÉCANOTHÉRAPIE

Les figures et dispositions du présent Catalogue étant notre propriété exclusive, nous nous réservons de prendre, vis-à-vis des contrefacteurs, toutes mesures de droit.

1911



Fig. 300. — Nouveau four à gaz fonctionnant dans nos Ateliers pour la trempe des ressorts.

INTRODUCTION



MONSIEUR LE DOCTEUR,

Nous avons l'honneur de présenter au Corps Médical un nouveau Recueil de nos Appareils.

Nous nous sommes efforcés au fur et à mesure de l'évolution des méthodes scientifiques et des progrès de la mécanique industrielle, de transformer notre technique et nous avons la certitude de vous offrir un Arsenal absolument au point.

Depuis la fondation de notre Maison en 1829, nous nous sommes toujours attachés à fournir à des prix raisonnables des Appareils d'une qualité et d'une application irréprochables.

Dans la présentation des Appareils ci-après nous avons ajouté quelques considérations pratiques basées sur une très longue expérience.

Veuillez agréer, Monsieur le Docteur, nos salutations les plus empressées.

DRAPIER et FILS.



Fig. 31

BANDAGES HERNIAIRES



Fig. 193. — Pelote dite « Bec-de-corbin ». Fig. 193'. — Pelote dit



Fig. 34

Indications à envoyer en faisant la demande d'un Bandage

1. — Circonférence du corps prise étant debout à l'endroit où s'applique le bandage (c'est-à-dire sur le gros des hanches, un peu au-dessous des crêtes iliaques comme dans les deux figures ci-dessus) pour les Hernies inguinales et crurales.
2. — Et à la taille en passant par le nombril pour les Hernies ombilicales (voir les deux figures ci-dessus).
3. — Y a-t-il malformation du bassin consécutive à une coxalgie, luxation congénitale, amputation, etc. Dans ce cas, donner en plus de la circonférence totale, la demi-circonférence du centre du pubis au centre du rachis pour chaque côté séparément.
4. — Genre de la Hernie. Est-elle inguinale, crurale, ombilicale?
5. — Côté de la Hernie (droit, gauche ou des deux côtés).
6. — Volume de la Hernie ou des Hernies (grosueur d'une amande, d'une noix, d'un œuf, d'une pomme). Tombe-t-elle dans le scrotum?
7. — La ou les Hernies rentrent-elles facilement et complètement?
8. — Age, sexe et profession du sujet.
9. — Constitution grasse ou maigre.
10. — Le sujet est-il habituellement constipé?
11. — Le sujet tousse-t-il fréquemment?
12. — Le sujet porte-t-il actuellement un bandage?

NOTA. — Des feuilles de mesures sont envoyées sur demande.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'APPLICATION DES BANDAGES DRAPIER

Nos ressorts de bandages inguinaux sont construits de façon à se placer sur le bassin sur un plan presque horizontal; en avant, légèrement ascendant, *c'est-à-dire passant un peu au-dessous des crêtes iliaques*; puis en arrière, horizontalement à deux travers de doigts au plus, au-dessus du sillon inter-fessier.

— La pelote en forme de poire (fig. 193) sera employée de préférence pour les pointes de hernies ou pour les hernies de la grosseur d'une petite noix, elle devra porter de façon à couvrir les orifices interne et externe du canal inguinal.

— La pelote en forme de bec de corbin (fig. 193') employée dans les hernies inguinales de la grosseur d'une noix, d'un œuf de poule ou de dinde devra être amenée en avant vers la verge.

— Plus la hernie sera volumineuse et plus l'application de la pelote vers la verge donnera d'efficacité à la contention.

— Le sous-cuisse sera fixé sur le côté du bandage et viendra se rattacher au

bouton inférieur du bas de la pelote et serré modérément; dans les bandages cruraux, la fixation du sous-cuisse se fera le plus près possible de la pelote.

— Dans les hernies inguino-scrotales et scrotales, la pelote en bec de corbin sera remplacée par la pelote dite anatomique (voir fig. 224, page 6) et pour augmenter l'adhérence de la pelote vers la verge, le prolongement de la pelote formant sous-cuisse sera boutonné du côté opposé à la hernie.

— La peau sera bien tirée sous le bandage et sous la pelote en particulier pour éviter les plis qui amènent des escharres.

— Le bandage devra être entretenu dans le plus grand état de propreté possible; nous conseillons de l'entourer d'une toile que l'on changera souvent.

Il y aura avantage à saupoudrer de poudre de talc les parties sur lesquelles porte le bandage et en particulier la région herniée.

— Enfin le bon fonctionnement de la peau sera entretenu par des lotions alcoolisées journalières.

BANDAGES INGUINAUX

Hernies du Premier Degré

BANDAGES

SIMPLES



Fig. 194.
Modèle des Hôpitaux. 6 » | Demi-fin. 15 »
Bon ordinaire (fig. 194). 10 » | Fin. 20 »

Les Bandages de la série fig. 196 sont destinés à des sujets n'exerçant pas de travaux pénibles, le ressort est étroit et la garniture très ajustée donne un ensemble léger.

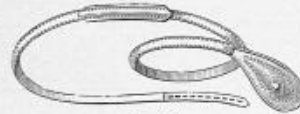


Fig. 196.
Fin (fig. 195). 20 » | Extra-fin. 30 » | Fil d'acier très mince. 30 »

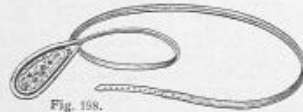


Fig. 198.
Bandage à ressort circulaire dit "Camper"
Le ressort de ce bandage entoure les 2/3 du bassin et par suite de ce dispositif ne prend pas de point d'appui sur la colonne vertébrale, endroit où la pression des bandages est la moins bien tolérée. C'est le plus confortable de tous les bandages et celui qui a le plus grande efficacité. Il convient à tous les hernieux en général, et en particulier aux personnes sensibles et aux vieillards chez lesquels les fesses souffrent souvent de leur place. pas aux bandages ordinaires de leur en place.
Ordinaire. . . 40 » | Fin (fig. 198) 50 »



Fig. 200.
Bandage simple à brisures de Drapier et à pelotes mobiles
Ce modèle se recommande par sa douceur au point d'appui de la colonne vertébrale et par l'extrême facilité avec laquelle chacun de ses pelotes ou ressorts peuvent être remplacés.
Fin (fig. 200). 40 »



Fig. 210. Collection Drapier et fils.
Hernie gauche du volume d'une noix (1^{er} degré).
Pour les Mesures, voir page 3.



Fig. 201.
Bandage double à brisures de Drapier et à pelotes mobiles
Ce modèle se recommande par sa douceur au point d'appui dorsal et par l'extrême facilité avec laquelle chacun de ses pelotes ou ressorts peuvent être remplacés.
Fin (fig. 201) . . . 50 »



Fig. 196.
Modèle des Hôpitaux. 10 » | Demi-fin. 25 »
Bon ordinaire . . . 15 » | Fin. 30 »



Fig. 197.
Fin (fig. 197). 30 » | Extra-fin. 45 » | Fil d'acier très mince 45 »

BANDAGES

DOUBLES



Fig. 199.
Bandage double à ressort circulaire
Dans les Bandages doubles, la pression au niveau des apophyses épineuses de la colonne vertébrale est toujours réparti sur les côtés, le ressort passe comme un pont sur le rachis. C'est le plus confortable des bandages doubles et celui qui a le plus grande efficacité. Il convient à tous les hernieux et en particulier aux personnes sensibles et aux vieillards aux fesses plates ou fuyantes.
Ordinaire (fig. 199). 60 » | Fin . . . 75 »

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

Hernies du Second Degré

HERNIES DU VOLUME D'UN ŒUF DE POULE OU DE DINDE

BANDAGES SIMPLES

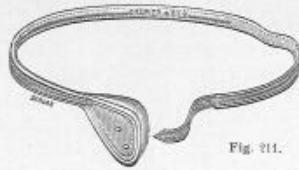


Fig. 211.

Les Bandages de la série Fig. 211 sont faits avec une garniture large et bien cousue, ils sont destinés à des sujets exerçant des travaux fatigants ou à des hernieux maigres.

Modèle des Hôpitaux 6 »
Bon ordinaire . . . 10 »
Demi-fin . . . 15 »
Fin. (fig. 211) . . . 20 »

Les Bandages de la série Fig. 212 sont destinés à des sujets n'exerçant pas de travaux pénibles, le ressort est étroit et la garniture très ajustée donne un ensemble léger.

Fin (fig. 212) . . . 20 »
Extra-fin . . . 30 »
Fil d'acier très mince . . . 30 »

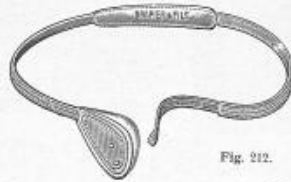


Fig. 212.

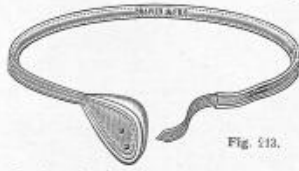


Fig. 213.

Bandage à ressort circulaire dit "Camper"
Le ressort de ce bandage entoure les 9/10^e du bassin et par suite de ce dispositif ne prend pas de point d'appui sur la colonne vertébrale, endroit où la pression des bandages est la moins tolérée. C'est le plus confortable de tous les bandages et celui qui a le plus grand succès. Il convient à tous les hernieux en général, et en particulier aux personnes sensibles et aux vieillards chez lesquels les fils sont souvent furantes et ne maintiennent pas aux bandages ordinaires de tenir en place.

Ordinaire . . . 40 » | Fin (fig. 213) . . . 50 »



Fig. 214.

Bandage simple à brisures de Drapier et à pelotes mobiles

Ce modèle se recommande par sa douceur au point d'appui de la colonne vertébrale et par l'extrême facilité avec laquelle chacun de ses pelotes ou ressorts peuvent être remplacés.

Fin (fig. 214) . . . 40 »



Fig. 219. Colonne vertébrale et fils.
Hernie gauche du volume d'un œuf de dinde.
Pour les Mesures, voir page 3.



Fig. 215.

Bandage double à brisures de Drapier et à pelotes mobiles

Ce modèle se recommande par sa douceur au point d'appui dorsal et par l'extrême facilité avec laquelle chacun de ses pelotes ou ressorts peuvent être remplacés.

Fin (fig. 215) . . . 50 »

BANDAGES DOUBLES

Les Bandages de la série fig. 216 sont faits avec une garniture large et bien cousue, ils sont destinés à des sujets exerçant des travaux fatigants ou à des hernieux maigres.

Modèle des Hôpitaux 10 »
Bon ordinaire . . . 15 »
Demi-fin . . . 25 »
Fin . . . 30 »

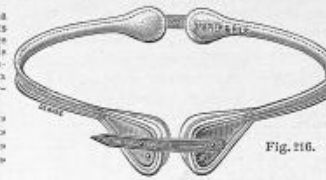


Fig. 216.

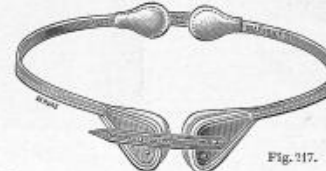


Fig. 217.

Les Bandages de la série fig. 217 sont destinés à des sujets n'exerçant pas de travaux pénibles, le ressort estroit, la garniture très ajustée donne un ensemble léger.

Fin . . . 30 »
Extra-fin . . . 45 »
Fil d'acier très mince . . . 45 »



Fig. 218.

Bandage double à ressort circulaire

Dans les bandages doubles, la pression au niveau des apophyses épineuses de la colonne vertébrale est toujours assez pénible, le modèle fig. 218 évite cette pression, qui se répartit sur les côtés, le ressort passe comme un pont sur le rachis. C'est le plus confortable des bandages doubles et celui qui a le plus grande durée. Il convient à tous les hernieux et en part culier aux personnes sensibles et aux vieillards aux fesses plates ou fuyantes.

Ordinaire (fig. 218) 60 » | Fin . . . 75 »

Hernies du Troisième Degré HERNIES INGUINO-SCROTALES ET SCROTALES BANDAGES SIMPLES



Fig. 15.

Bandage large
Ordinaire 15 » | Fin. . . . 20 »

Les Bandages de la série fig. 15, sont destinés à des sujets peu fortunés se livrant à des travaux pénibles, qui ne peuvent faire l'acquisition des bandages à pelote anatomique fig. 16. Les bandages sont constitués avec des ressorts à grande puissance mais larges et très matelassés.



Fig. 222.



Fig. 16.

Bandage à pelote anatomique à ressort simple large. . . . 30 »

Les Bandages de la série fig. 16, sont établis avec un ressort simple dépassant de 3 à 4 cm environ le centre du rocher, il est d'une forte pression, mais large et bien matelassé. Sa pelote dite anatomique, embrasse une large surface et s'oppose bien à la descente de la hernie.



Fig. 220. *Collection Drapier et fils.*
Hernie scrotale droite.



Fig. 221. *Collection Drapier et fils.*
Même sujet, vu la hernie réduite par un bandage à ressort circulaire (fig. 221).

Par suite de négligence ou après avoir fait usage de mauvais bandages, de nombreux hernieux sont porteurs de hernies scrotales volumineuses qui, de l'avis de la majorité des Chirurgiens ne sont pas justiciables de la cure radicale.

Ces malades ont ainsi des hernies qui constituent une véritable infirmité empoisonnant leur existence journalière.

Nous nous sommes fait une spécialité du maintien de ces grosses hernies scrotales et lorsqu'elles sont entièrement réductibles, nous pouvons affirmer la certitude de leur contention, sauf quelques exceptions fort rares. C'est ainsi que nous avons pu améliorer chez des adultes jeunes notamment, des hernies scrotales au point de les ramener au 1^{er} degré, n'exigeant plus que le maintien d'un bandage léger.

La construction et l'application de ces bandages étant très délicates, il y aura avantage, chaque fois que cela sera possible, à nous adresser le sujet afin de pouvoir apporter toute la précision désirable à la confection du bandage.

Pour les Mesures, voir page 3.

Les fig. 222 et 223 sont destinées à montrer la différence de longueur des ressorts constituant les bandages fig. 16 et 224. On se rend compte à simple examen de la supériorité de contention et de la facilité de tolérance du bandage fig. 224.

Les Bandages de la série fig. 224, sont ceux que nous recommandons, à l'exclusion de tous autres, pour la contention des hernies scrotales. Grâce au ressort de Camper (fig. 224) qui est en ras de la ligne du bassin, malgré la grande puissance de son large ressort, il est beaucoup mieux toléré que les bandages fig. 222, car il ne prend aucun point d'appui sur la colonne vertébrale. La pelote large et de forme anatomique s'oppose puissamment à la sortie de la hernie; en tout cas c'est le seul appareil qui pourra être appliqué chez les sujets ayant les fosses pleines.

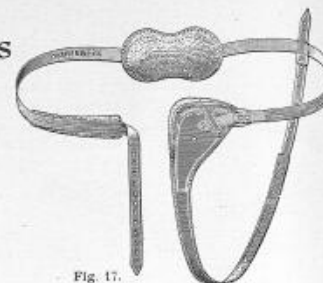


Fig. 17.

Bandage à brisures et avec pelote anatomique mobile, modèle Drapier et Fils. 50 »

Les Bandages de la série fig. 17 possèdent un point d'appui dorsal en 8 de chiffre très matelassé et de plus permettent le remplacement avec une grande facilité des pelotes ou ressorts.



Fig. 223.



Fig. 224.

Bandage à pelote anatomique avec ressort large circulaire de Camper. . . . 50 »

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

HERNIES INGUINO-SCROTALES et SCROTALES

BANDAGES DOUBLES

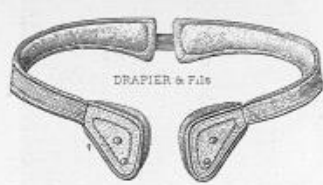


Fig. 19.

Bandage double large (fig. 19).
Ordinaire . . . 20 » | Fin . . . 30 »
Les bandages de la série fig. 19 sont destinés à des sujets peu fortunés qui ne peuvent faire l'acquisition de bandages à pelotes anatomiques (fig. 20) et qui se livrent à des travaux pénibles. Les ressorts de ces bandages sont d'une grande épaisseur, mais larges et très matelassés.



Fig. 20.

Bandage double à pelote anatomique (fig. 20).
Ordinaire . . . 30 » | Fin (fig. 30), 45 »
Les bandages de la série fig. 20 sont établis avec deux ressorts larges s'arrivant en arrière au niveau des apophyses épineuses de la colonne vertébrale. Les points d'appui en arrière sont très matelassés et étendus. Les pelotes anatomiques sont très larges.

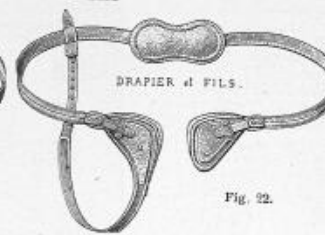


Fig. 22.

Bandage double à brisures et à pelotes mobiles anatomiques de Drapier (fig. 22).
Ordinaire . . . 60 » | Fin . . . 75 »
Les bandages de la série fig. 22 possèdent un point d'appui dorsal en 8 de chiffre très matelassé qui adoucit beaucoup la compression des ressorts au point d'appui du dos. Le remplacement des pelotes ou ressorts est très facile avec ce modèle.

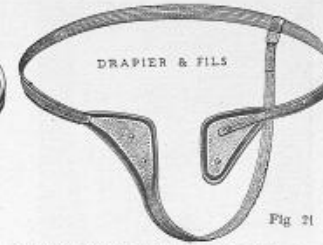


Fig. 21.

Bandage double à ressort circulaire large de Camper (fig. 21).
Ordinaire (fig. 21) 70 » | Fin . . . 85 »
Les bandages de la série fig. 21 ont un ressort qui ne comprime pas sur la colonne vertébrale, il est beaucoup mieux toléré que les autres bandages. Ils conviennent surtout pour les anatomies maigres et pour les vieillards à fesses plates ou fuyantes.

HERNIES INGUINO-SCROTALES avec ÉVENTRATION LATÉRALE



Fig. 225. *Collection Drapier et fils.*
Hernie du 2^e degré avec forte dilatation latérale de toute la région pubienne.



Fig. 226.

Bandage modèle Drapier et Fils.

Dans les cas de hernies doubles volumineuses tenant toute la région pubienne, il y a avantage à employer l'appareil du type fig. 226. Le dispositif central embrasse toute la région réduisant à la fois l'éventration et les hernies. Le ressort circulaire bien capitonné et large, d'une force moyenne, donne un embrasement rigide et d'une certaine souplesse pourtant, qui est aisément supporté.

Prix : 75 »

Pour Mesures, voir page 3.



Fig. 227. *Collection Drapier et fils.*
Le même sujet, vu avec un bandage Drapier (fig. 226).

HERNIES VOLUMINEUSES AVEC ÉVENTRATION LATÉRALE (Suite)



Fig. 228. Collection Drapier et fils.
Hernie gauche du 3^e degré chez une femme avec éventration volumineuse.

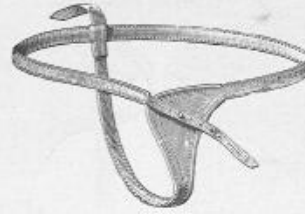


Fig. 229.

Dans le cas fig. 228, la hernie très volumineuse du côté gauche chez une femme obèse, s'accompagne d'éventration latérale embrassant toute la région du pubis et retombant sur les cuisses.

La hernie est parfaitement réduite et maintenue par un bandage du type fig. 229, muni d'une pelote très large, de genre anatomique et de forme adaptée au cas, montée sur large ressort circulaire de Camper. . . . Prix. 60 »



Fig. 230. Collection Drapier et fils.
Le même sujet vu avec le bandage fig. 229, la hernie et l'éventration étant complètement réduites.

HERNIES AVEC DILATATION BANDAGES " PERFECTUS "

Modèle DRAPIER & FILS



Fig. 202.

Bandage " Perfectus " pour hernies au 1^{er} degré avec dilatation.

Prix : Ordinaire. 40 »
Fin (fig. 202) 50 »

Dans les cas de hernies accompagnées de dilatation nous employons des bandages du type courant, page 4 et 5, mais avec des pelotes plus renflées en largeur.

Lorsque la dilatation est très marquée nous employons nos modèles dits " Perfectus " (fig. 202 et 203).

Ces bandages doubles sont composés de deux ressorts relativement faibles comme force, très bien tolérés par les hernieux.

Ils s'attachent dans le dos.

Les pelotes sont à vis et réglables en avant.

Pour les Mesures, voir page 3.



Fig. 203.

Bandage " Perfectus " pour hernies au 2^e degré et hernies inguino-scrotales, avec forte dilatation.

Prix : Ordinaire. 50 »
Fin (fig. 203) 70 »

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

HERNIES INGUINALES AVEC PTOSE ABDOMINALE



Fig. 47

Ceinture-Maillot pour ptose abdominale

Ordinaire (jusqu'à 20 c/m de hauteur) . . .	20	>
Moyenne	30	>
Fine	40	>



Fig. 191. *Collection Drapier et fils.*
Sujet vu avec une ceinture-maillot et le bandage.

Chez les hernieux ayant beaucoup maigri, les vieillards, les dyspeptiques, la hernie est fréquemment accompagnée de ptose abdominale. Nous employons dans ces cas avec succès le port d'une ceinture-maillot en tissu souple enveloppant l'abdomen et soutenant la ptose; le bandage est placé sur la ceinture et assure un maintien absolu de la hernie.

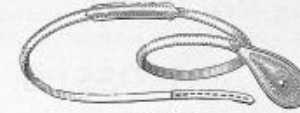


Fig. 192

Tous les bandages inguinaux des pages 4, 5 et 6, peuvent être employés avec la ceinture-maillot.

HERNIES DOUBLES DE VOLUME DIFFÉRENT

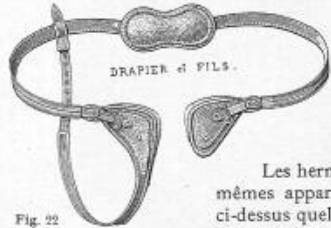


Fig. 22



Fig. 193

Pelote dite "Bec-de-Corbin"

Fig. 193

Pelote dite "Poire"

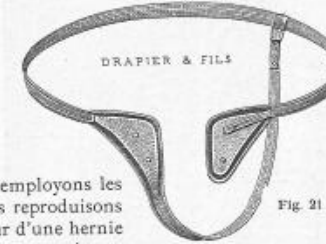


Fig. 21

Les hernies doubles sont fréquemment d'un volume différent, dans ces cas nous employons les mêmes appareils, aux mêmes prix, que ceux décrits aux pages 4, 5 et 6 et dont nous reproduisons ci-dessus quelques figures; la fig. 193 représente le bandage destiné à un hernieux porteur d'une hernie droite du volume d'un œuf de dinde et d'une hernie gauche du volume d'une noix; la fig. 22 représente le bandage pour hernie scrotale à droite et du volume d'un œuf à gauche; enfin la fig. 21 indique le bandage pour une hernie scrotale droite et inguino-scrotale gauche.

HERNIES INGUINALES IRRÉDUCTIBLES

VOLUME D'UNE NOIX ou D'UN ŒUF DE POULE ou de DINDE

Dans les cas de hernies irréductibles du volume d'une noix à une pomme, nous employons des bandages à pelote concave qui localisent la tumeur comme dans le creux de la main (voir fig. 232.)

Souvent à la suite de la compression prolongée, la hernie cède peu à peu, il suffit alors de bourrer progressivement la concavité de la pelote, afin d'assurer l'appui



Bandage à pelote concave (fig. 232).
Ordinaire . . . 20 » | Fin . . . 20 »
Avec ressort circulaire de Camper. 40 »
Fin. 50 »

constant de celle-ci sur la hernie jusqu'au jour où la réduction étant totale, nous substituons un bandage à pelote convexe à celui à pelote concave.

Les modèles à 30 et 50 francs permettent de substituer une pelote convexe lorsque la réduction est acquise en utilisant le même ressort moyennant un supplément de 10 fr. pour la pelote convexe.

GROSSES HERNIES SCROTALES IRRÉDUCTIBLES

Quand une hernie scrotale-épiploïque ne rentre plus et a pris des proportions considérables, nous employons l'appareil suspenseur ci-contre dont la poche, en tissu peau de diable, offre, en même temps qu'une grande douceur, une grande force de contention. La ceinture de cet appareil en tissu large, bordée

de peau de chamois, a pour but de soutenir non seulement la poche, mais encore de s'opposer à la sortie de nouvelles portions intestinales.

Dans certains cas : réduction partielle de la hernie, dilatation considérable, etc. ; une pelote herniaire fixée à l'intérieur de la ceinture, rend de grands services.

Photographie du scrotum prise d'après un moulage, hernie irréductible énorme chez un obèse. Circonférence du scrotum horizontalement) 96 c/m, hauteur 38 c/m.



Fig. 233. Collection Drapier et fils. Sujet atteint de hernie scrotale épiploïque droite irréductible.

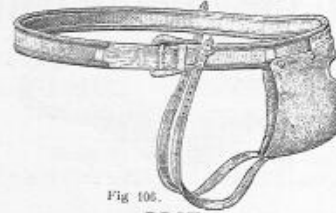


Fig. 106.

PRIX :
Suivant la taille . 25 » à 30 » et 35 »
Pelote herniaire, en plus 5 »

Mesures :
Donner la circonférence sur le gros du bassin ;
du scrotum dans le sens horizontal.
Longueur du scrotum en allant d'un entre-jambe à l'autre.
Quel est le côté du scrotum qui est le plus gros ?
De quel côté la verge se trouve-t-elle déplacée ?

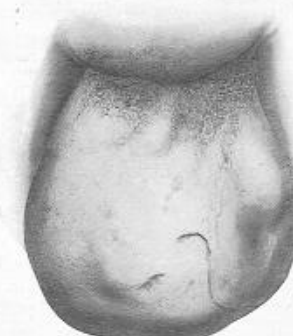


Fig. 234. Collection Drapier et fils. On aperçoit sur la côté droit de la photographie l'arrondi d'un testicule et un peu en bas et à droite le méat urinaire, la verge ayant complètement disparu dans la masse herniée.

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS



Fig. 235.

Bandage anglais simple
Ordinaire 20 » | Fin 30 | Extra-fin. 40 »
Avec pelote anatomique. 50 »



Fig. 236.

Bandage français

Les deux figures superposées indiquent l'opposition existant dans le principe du bandage anglais et du bandage français.

BANDAGES ANGLAIS

Le bandage anglais, inventé par Salmon, mécanicien anglais et introduit en France par le père de notre distingué confrère M. Wickham, diffère du bandage français plus habituellement employé aujourd'hui, par son ressort qui passe sur la hanche opposée à la hernie (fig. 235) alors que l'application du ressort du bandage français se fait sur la hanche correspondante à la hernie (voir fig. 236).

Les deux figures superposées indiquent ainsi nettement l'opposition des deux bandages.

Nous n'estimons ce bandage utile que dans quelques cas spéciaux, car la mobilité trop grande de la pelote articulée à boule, rend sa fixité souvent incomplète et par conséquent la contention insuffisante.

De même il est plus difficilement supporté par les hernieux, au point d'appui, que le bandage français.

Le principe du bandage anglais n'existe que dans le bandage simple, le bandage double anglais empruntant le principe du ressort français.

BANDAGES SANS RESSORTS

POUR LA NUIT



Fig. 14.

Bandage Ceinture élastique
Simple ordinaire. 20 » | Fin. 30 »
Double — 30 » — 40 »

Les bandages sans ressorts, élastiques ou non, ne peuvent rendre aucun service pendant le jour. Leur seul emploi utile est limité au lit où ils doivent être portés par tous ceux qui toussent ou dont les hernies sont développées au point de sortir lorsqu'ils sont couchés, ou encore par les hernieux ayant de fréquents besoins de se lever la nuit.

Une longue expérience personnelle nous permet d'affirmer que le hernieux porteur d'un bandage sans ressort pendant le jour, est assuré d'une aggravation de sa hernie dans un délai variant de quelques mois à quelques années.

D'ailleurs l'essai dynamométrique du bandage sans ressort permet de constater que sa pression sur le canal inguinal est sensiblement égale à la poussée de la hernie la plus légère: on conçoit aisément qu'au moindre effort du hernieux, le bandage sans ressort devienne insuffisant comme contention.

De plus, la pression maximum du bandage sans ressort s'exerce sur les crêtes iliaques, point où elle est tout à fait inutile.

MASSEUR HERNIAIRE



Fig. 441.

Modèle Drapier et fils, Déposé
Prix 12 »

Spécial pour tonifier la paroi chez les hernieux qui ont un travail sédentaire ou une paroi atrophie.

Une notice spéciale accompagne chaque appareil

Pour appuyer notre dire, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire l'opinion du Docteur JUST-LUCAS CHAMPIONNIÈRE :

« Quant aux bandages sans ressort que l'on a tenté depuis quelques années de remettre en circulation, ils sont sans valeur aucune, relativement aux bandages contenant des ressorts.

« Le conseiller est retourner en arrière, avant l'époque de la découverte des ressorts.

« Celui qui conseillera actuellement de transformer un confortable wagon-lit par une diligence du bon vieux temps, ne commettrait pas une faute plus manifeste que celui qui veut sérieusement remplacer un bandage à ressort par un bandage sans ressort.

« Le principe du ressort dans l'application du bandage est fondamental. Il est utile à ce point qu'aujourd'hui il ne faut compter comme justement efficace, dans l'arsenal herniaire, que les bandages maintenus par le ressort. » (1)

(1) *Hernies, Hygiène et Thérapeutique*, D^r Just-Lucas Championnière.

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

BANDAGES POUR HYDROTHERAPIE ET BAINS

BANDAGES POUR CLIMATS TROPICAUX

Si les hernies sont filantes ou volumineuses: il est utile de porter un bandage aux bains chauds, et s'il s'agit de bains froids, en mer, en rivière ou en piscine et qu'on se livre au plaisir de la natation, la prudence la plus élémentaire conseille de porter un bandage. Les bandages destinés à cet usage, ont leurs ressorts recouverts d'une couche de gomme, remplaçant la garniture ordinaire, et sont ainsi rendus imperméables. Nous employons encore ce type de bandage pour les colonies où, par suite de la haute

température, les bandages ordinaires s'altèrent plus rapidement, la protection donnée par la couche gommée ne permet pas à la sueur de rouiller le ressort. Malgré l'avantage de durée que possèdent ces bandages, ils ne devront être utilisés que pour les cas ci-dessus indiqués, car ils sont durs comme point d'appui et pelotes, et un long porter quotidien amènerait obligatoirement une dilatation considérable au niveau du canal inguinal.



Fig. 237.
Bandage simple à ressort circulaire recouvert en gomme noire pour hernies du 1^{er} et 2^e degré (fig. 237) 20 »

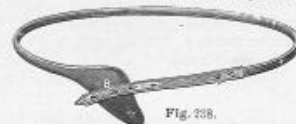


Fig. 238.
Bandage simple à ressort circulaire recouvert en gomme noire avec pelote en bec allongé pour hernies inguino-scrotales ou scrotales (fig. 238). 25 »

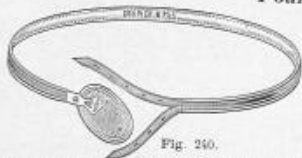


Fig. 239.
Bandage double recouvert en gomme noire, pour hernies du 1^{er} et du 2^e degré (fig. 239). 25 »
Le même pour hernies inguino-scrotales ou scrotales 35 »

BANDAGES SUITES D'OPÉRATIONS

CURE RADICALE

Pour les CEINTURES SUITES D'OPÉRATIONS, voir page 23



- Bandage applicable à la suite de la Cure Radicale
- | | |
|--|------|
| Bandage à pelote fixe: | |
| Simple, ordinaire | 15 » |
| Double, ordinaire | 25 » |
| Fin | 20 » |
| Double, fin | 30 » |
| Bandage avec tête de ressort à coulisse latérale (fig. 240), fin | 30 » |
| double | 45 » |
| Bandage à pelote fixe et ressort circulaire de Camper | 40 » |
| double | 60 » |
| Bandage avec tête de ressort à coulisse latérale avec ressort circulaire de Camper | 50 » |
| Le même, double | 70 » |

Dans les bandages pour suites d'opérations, nous nous proposons simplement de soutenir la cicatrice sans la comprimer brutalement. Les ressorts employés sont très souples et les pelotes absolument plates et très moelleuses.

NOTA. — Sur la demande de MM. les Docteurs, nous envoyons prendre mesures et faire les applications d'appareils à domicile sans augmentation. Pour la Banlieue ou la Province, nous demandons une indemnité de déplacement.



Fig. 241. — Ouvrier limant les ressorts sur une meule mue par un moteur électrique.

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

HERNIES CRURALES

La forme du bandage crural diffère essentiellement de celle du bandage inguinal par la courbure presque verticale du collet.

Dans la contention des hernies crurales, on se trouve aux prises avec de grandes difficultés par suite de la flexion de la cuisse qui tend à déplacer constamment le bandage; dans son application sur le sujet, au point d'appui postérieur il devra être placé au ras du sillon inter-fessier; le sous-cuisse partira du commencement du collet, ainsi qu'il est indiqué fig. 242.

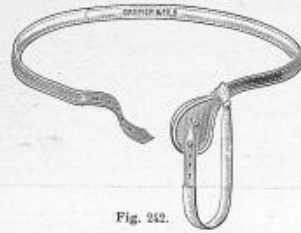


Fig. 242.

Bandage simple crural

Bandage à garniture large ordin ^{re}	10 »
1/2 fin	15 » Fin 20 »
Bandage à garniture étroite, fin	20 »
Bandage avec tête de ressort à coulisse latérale	30 »
Bandage avec ressort circulaire de Camper	40 » fin. 50 »



Fig. 243.
Hernie crurale gauche.



Fig. 244.
La même, vue avec le bandage appliqué.

Pour les Mesures, voir page 3.

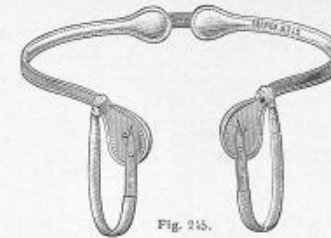


Fig. 245.

Bandage double crural

Bandage à garniture large, ordin ^{re}	15 »
1/2 fin	25 » Fin 30 »
Bandage à garniture étroite, fin	30 »
Bandage avec têtes de ressort à coulisse latérale	45 »
Bandage avec ressort circulaire, ordinaire.	60 » Fin. 75 »

HERNIES CRURALE ET INGUINALE DU MÊME CÔTÉ

Nous employons pour ce cas un bandage avec deux ressorts indépendants et de la force nécessaire à la contention de chaque hernie, s'articulant en arrière sur un coussin en 8 de chiffre, destiné à supporter la pression.

Bandage pour hernie crurale et inguinale du même côté, ordinaire. 45 », fin. 60 »

HERNIES INGUINALE D'UN CÔTÉ ET CRURALE DE L'AUTRE

Dans ce cas, nous appliquons le bandage avec côté inguinal du côté de la hernie inguinale et l'autre côté de forme crurale pour la hernie crurale, les mêmes appareils et prix que ceux des pages 4 et 5 sont applicables pour ce cas.

HERNIES OMBILICALES

Indications à envoyer en faisant la demande d'un bandage

Circonférence du corps prise à nu, debout, en passant par l'ombilic ? — Volume de la hernie ? — Forme du nombril ? — (voir fig. 246, 247, 248 ci-dessous). — La hernie rentre-t-elle facilement et complètement ? — Age ? — Sexe ? — Profession du sujet ? — Le sujet toussé-t-il fréquemment.

HERNIES OMBILICALES DIVERSES avec TYPE des PELOTES USITÉES pour CHACUNE



Fig. 246.
Abdomen avec hernie ombilicale à fleur de peau.



Fig. 247.
Abdomen à paroi concave avec hernie ombilicale au fond de la cavité.



Fig. 248.
Hernie ombilicale irréductible.

FORME des PELOTES EMPLOYÉES pour CHAQUE CAS



Fig. 249.
Coupe de la pelote destinée à la contention de la hernie ombilicale ci-dessus.



Fig. 250.
Pelote à bouton conique de hauteur variant suivant la profondeur de la cavité.



Fig. 251.
Pelote conique, modifiée de M. le Professeur Berger.



Fig. 252.
Coupe de la pelote concave destinée à la contention de la hernie ci-dessus.

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

BANDAGES OMBILICAUX

1° Le Bandage ombilical, à ressort simple, dont la pelote varie suivant les cas et les conformations.

Ordinaire 35 "
Fin (fig. 24) 30 "

2° Le Bandage ombilical à pivots, de Drapier et Fils dont les ressorts, souples et légers, suivent, au moyen de trois pivots, tous les mouvements du corps laissant la pelote immobile, ce qui est important, puisque cette immobilité empêche son déplacement.

La pelote est montée sur une plaque d'aluminium martelé.

Cette ceinture ombilicale est très légère tout en offrant un usage fort long et une grande puissance.

Ordinaire (fig. 25) 50 "
Fin 75 "

3° Bandage ombilical élastique, à ressort central de Dolbeau.

Ordinaire 35 "
Fin (fig. 254) 85 "

NOTA. — Les pelotes ci-contre peuvent être employées seules à l'intérieur des ceintures abdominales. Leur prix est en supplément de celui de la ceinture : Avec garniture chambrée 5 "
Avec garniture en peau d'agneau 8 "



Fig. 253. Collection Drapier et fils. Ouvrier coupant un ressort à la cisaille.

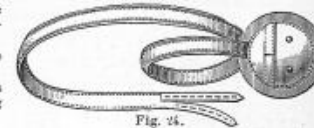


Fig. 24.



Fig. 25.

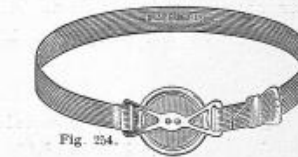


Fig. 254.

Ceintures et Bandages Ombilicaux (Suite)


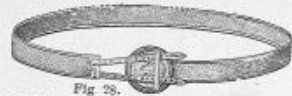


Fig. 26.
Bandage ombilical sans ressort, en tissu élastique plus spécialement employé pour le nuit, mais qui néanmoins peut rendre également quelques services pour le jour.
Prix : Ordinaire, . . . 15 » . Fin. . . 25 »

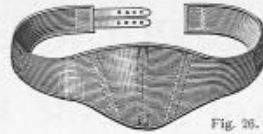

Ceinture s'attachant derrière.
Ceintures (Fig. 26 et 27) munies d'une pelote ombilicale, montée sur plaque d'aluminium, sont employées dans les cas où l'abdomen ayant besoin d'être soutenu comme pour la grossesse, l'obésité, l'entéroptose, etc., il existe, de plus, une hernie ombilicale.
Tissu ordinaire, 25 et 30 fr. | Tissu fin, 40 et 50 fr. | Tissu soie, 70 et 80 fr.

Notes. — Pour les petites hernies ombilicales irréductibles, tous les appareils Fig. 24, 25, 25A et 28 peuvent être employés, on les monte alors avec une pelote concave du type Fig. 253 page 14, ce genre de pelote constitue une augmentation de 5 francs sur les autres modèles.

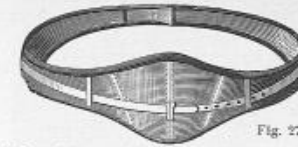


Fig. 27.
Ceinture à compression renforcée, s'attachant devant.



Fig. 19.
Bandage ventral, composé d'une large plaque ovale, montée sur un ressort large, souple et garni moelleusement.
Au centre de cette plaque, une pelote ombilicale est vissée dans certains cas.
Prix : 40 et 50 fr., suivant tailles.

ÉVENTRATIONS




Fig. 30.
Appareil ventral, composé d'une large plaque, matelassée et maintenue par deux ressorts larges, garnis moelleusement, embrassant le tour du corps, à l'exception de la région dorsale, et reliés en arrière par une courroie.
Prix : 75 francs



Fig. 32.
Ceinture ventrale, diminutif de l'appareil suivant, est montée d'après le même principe, mais sans aucune pièce métallique.
Elle est construite en tissu rigide et quelquefois partiellement élastique, elle peut rendre de bons services pour des éventrations légères.
On y adjoint parfois une plaque métallique légère.
Prix : Ordinaire 60 francs
Grandes tailles, 70 et 80 fr.



Fig. 31.
Le Ventral Drapier est le plus puissant et le plus confortable de tous les appareils existants. Avec cet appareil, l'éventration la plus considérable est réduite de façon absolue et cela avec le minimum de gêne.
Il se compose d'une plaque embrassant la totalité de l'éventration et de telle forme que l'abdomen le plus distendu est ramené à sa position naturelle.
Comme moyen d'action, un ressort d'une seule pièce enfoncé dans une ceinture de maintien, très large et basse, et, comme celle-ci, tout le pourtour postérieur du bassin et vient, au moyen d'un système de fermeture à œil, maintenir la plaque dans la position voulue, sans dérangement possible.
Prix : 80 francs
et au-dessus pour les grandes tailles, 100, 120 et 150 fr.

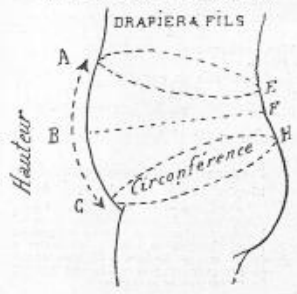

Indications à envoyer en faisant la demande d'un appareil pour éventration
Donner les trois mesures de circonférence A. E. — B. F. — C. H. prises debout, l'éventration étant réduite, prises couchés.
Indiquer le volume approximatif : tête d'enfant, d'adulte, grosseur de deux têtes, etc.
Diamètre horizontal de l'éventration. Diamètre vertical de l'éventration.
Age. — Sexe. — Genre de travail. Hauteur de la personne.
Les hanches sont-elles peu ou très développées.

Hernie épigastrique
Ecartement de la ligne blanche
Les appareils pour hernies épigastriques et pour écartement de la ligne blanche sont les mêmes bandages et les mêmes prix que ceux des fig. 25 et 25A, employés pour la hernie ombilicale, la pelote seule diffère, elle est rectangulaire et plate au lieu d'être ronde.

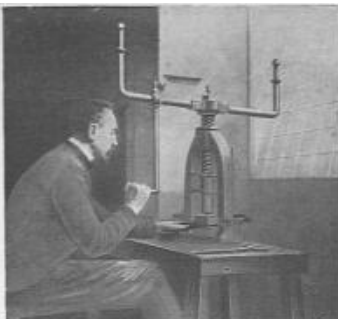


Fig. 210. Collection Drapier et fils. Ouvrier travaillant au découpoir à plaques.

BANDAGES POUR ENFANTS

BANDAGES POUR BÉBÉS

de un jour à deux ans.

Chez les nouveaux-nés et jusqu'au moment où les enfants sont complètement propres (2 ans en moyenne), les bandages en caoutchouc ou recouverts de caoutchouc ou de gomme, sont les seuls applicables.

BANDAGES INGUINAUX



Fig. 133
Bandage simple en caoutchouc à pelote pneumatique
Prix : 7 francs

Dans les cas légers, hernies au 1^{er} et 2^d degré rentrant bien, les bandages en caoutchouc (fig. 133 et 134) suffisent. Dans les hernies rebelles, qui ne peuvent être contenues par les bandages en caoutchouc, dans les cas graves, le bandage curatif (fig. 135) donne des résultats parfaits et nous n'avons jamais eu d'insuccès.

NOTA. — Toutes les pommades, vaselines, corps gras, décomposent le caoutchouc et en abrègent la durée; éviter leur contact avec les appareils en caoutchouc.



Fig. 134
Bandage double en caoutchouc à pelotes pneumatiques
Prix : 10 francs



Fig. 135
Bandage curatif à ressort circulaire recouvert de caoutchouc pur
Simple 20 fr. Double 25 fr.

BANDAGES OMBILICAUX

Nos ceintures ombilicales sont construites de façon à faire face à toutes les formes de ventres, il suffit de les inverser suivant les conformations; appliquant bien, elles n'ont pas l'inconvénient dangereux de se déplacer. De plus, nos pelotes ombilicales, loin d'être petites et pénétrantes et de dilater l'anneau au lieu de le refermer, comme dans la majorité des ceintures ombilicales vendues un peu partout, sont à large surface et présentent un excellent point d'appui à l'ébri duquel les tissus se reforment naturellement.

Nous livrons également ces ceintures entièrement perforées de trous multiples sans augmentation de prix, mais ces petits trous ont l'inconvénient de faire ventouse sur la peau.

Ceinture ombilicale en caoutchouc à pelote démontable de Drapier.

Prix : 8 fr.



Fig. 136.



Fig. 136.

Pelote ombilicale vue démontée de face et de profil.

Pelotes spéciales pour les bains, détachables, recouvertes de gomme.
Prix : 3 fr. 50 et 4 francs.

BANDAGES POUR ENFANTS de 2 ans à 14 ans.

Dès cet âge, et en général aussitôt que l'enfant est devenu propre, il doit quitter le bandage ou la ceinture en caoutchouc, qui ne sont que des palliatifs, et recourir aux bandages à ressorts, qui seuls peuvent donner une contention efficace.

Prix des Bandages pour hernies inguinales

Ordinaire, modèle des hôpitaux.	6	»	double	8
Bon ordinaire	10	»	—	12
1/2 fin	12	»	—	15
Fin (fig. 137)	15	»	(fig. 138)	20
Extré-fin ou ressort circulaire	20	»	—	25

Pour Mesures, voir page 3



Fig. 137
Bandage simple



Fig. 138
Bandage double



Fig. 139
Bandage curatif à ressort circulaire

Bandage curatif à ressort circulaire Simple . 25 » double . 40 »

Le bandage curatif (fig. 139) rend particulièrement de grands services dans les hernies développées et dans les cas graves, là où l'emploi du bandage ordinaire a échoué et dans les hernies légères, il amènera la guérison plus rapidement qu'avec les autres genres de bandages.

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

**BANDAGES POUR HERNIES OMBILICALES
& ÉCARTEMENT DE LA LIGNE BLANCHE**

chez les enfants de 2 à 14 ans.



Fig. 140

**Ceinture
en tissu élastique**
Jusqu'à 55 % de long 15 »
De 55 à 75 % 20 »



Fig. 141

**Bandage ombilical
à ressort simple**
Ordinaire 12 »
Fin 15 »



Fig. 142

**Bandage ombilical
à pivots de Drapier**
Ordinaire 25 »
1/2 fin (fig. 142) 30 »
Fin 40 »

Le type de bandage fig. 141 se déplace facilement chez les bébés ayant un ventre très bombé et les hanches peu développées, dans ce cas on devra employer de préférence les modèles fig. 140 et 142.

Nota. — Les bandages pour écartement de la ligne blanche sont les mêmes que ceux ci-dessus pour hernies ombilicales et du même prix, les pelotes seules varient de forme, elles sont rectangulaires au lieu d'être rondes.

Nota. — Pour tous renseignements et mesures nécessaires à l'envoi des bandages, voir page 3.

ECTOPIE TESTICULAIRE

Les cas d'ectopie testiculaire étant beaucoup plus fréquents dans l'enfance, c'est pour cette raison que nous avons classé les bandages pour l'ectopie testiculaire dans la catégorie des bandages d'enfants.

Pour les adultes, nous construisons un appareil du même type que la figure 143.

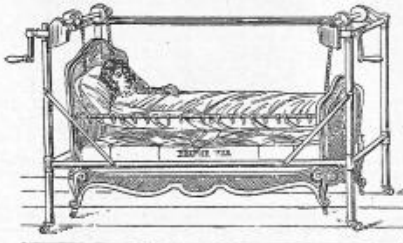


Fig. 143

Bandage ordinaire 12 »
— 1/2 fin 17 »
— fin 20 »
— avec tête de ressort à coulisse 25 »
— avec ressort circulaire 30 »

	Enfants	Adultes
Bandage ordinaire	12 »	15 »
— 1/2 fin	17 »	20 »
— fin	20 »	25 »
— avec tête de ressort à coulisse	25 »	30 »
— avec ressort circulaire	30 »	40 »

Quand, après l'emploi du bandage avec pelote en fourche, le testicule est suffisamment descendu, on remplace cette pelote par une pelote pleine afin de maintenir la hernie consécutive à la migration du testicule.



**LITS MÉCANIQUES
VOITURES & FAUTEUILS
pour MALADES**

Consulter notre Catalogue spécial qui sera adressé franco sur demande.

LOCATION DE LITS MÉCANIQUES ASEPTIQUES

CEINTURES

Indications à envoyer en faisant la commande d'une ceinture

Indiquer :
 1° Pour quel cas elle doit être employée et donner les mesures suivantes prises debout (dans le cas où les mesures seraient prises couché, prière de le mentionner);
 2° La circonférence au bas du ventre, C-H;
 3° La circonférence au milieu du ventre, B-F;
 4° La circonférence en haut à l'endroit où doit s'arrêter la ceinture, A-E;
 5° Hauteur que devra avoir la ceinture, A, B, C, ou hauteur inférieure à A, B, C, suivant le cas;
 6° La forme du ventre (plat ou bombé);
 7° Les hanches sont-elles peu ou très développées?
 8° La personne est-elle petite, moyenne ou grande?
 9° Sexe de la personne;
 10° Dans le cas de rein mobile ou de cicatrices à maintenir, indiquer le côté et la hauteur de la cicatrice.

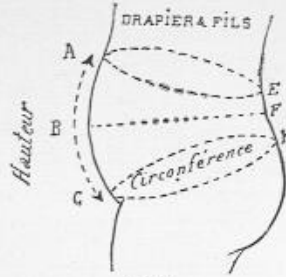


Fig. 35

OBSERVATION IMPORTANTE

Nos ceintures sont taillées de façon à être placées suivant un plan horizontal et non ascendant. Faute de se conformer à cette indication, les ceintures auront toujours une application défectueuse et baigneront du haut.

Les ceintures qui occupent une si grande place en gynécologie et dans le traitement de toutes les affections abdominales, ont toujours été l'objet de tous nos soins. Nous modifions nos modèles ou en créons de nouveaux suivant les indications spéciales de MM. les Docteurs.

Cinq salons d'essayage, auxquels sont attachés un personnel féminin très compétent, sont réservés à l'application des ceintures.

Nous envoyons nos essayeuses à domicile, sans augmentation de prix lorsque MM. les Docteurs le désirent.

Pour la banlieue et la province, nous demandons une indemnité de déplacement.

CEINTURE DE GROSSESSE entièrement tricotée à la main.

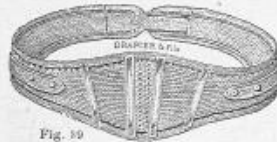


Fig. 30

Cette ceinture se recommande spécialement en raison de sa souplesse et de sa parfaite adaptation aux modifications successives du ventre pendant la grossesse. Vers le 8^e mois on peut adapter en bas de la ceinture, un sous-ventre pour augmenter l'action de soutien au niveau du bas-ventre.

Cette ceinture a de plus l'avantage de se blanchir très facilement.

En coton, jusqu'à 20 c/m de haut, de ventre . . . 25 »
 Au-dessus . . . 30 »
 En soie, jusqu'à 20 c/m de haut, de ventre . . . 50 »
 Au-dessus . . . 65 »
 Supplément pour sous-ventre . . . 8 »

CEINTURES DE GROSSESSE

CEINTURE DE GROSSESSE en tissu élastique avec lacunes latérales.

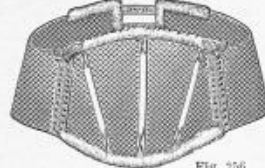


Fig. 366

En tissu ordinaire jusqu'à 20 c/m de haut. . . 15 »
 Au-dessus . . . 20 »
 En tissu 1^{re} qualité, jusqu'à 20 c/m . . . 25 »
 Au-dessus . . . 30 »
 En tissu fin, jusqu'à 20 c/m . . . 40 »
 Au-dessus . . . 50 »
 En soie, jusqu'à 20 c/m . . . 65 »
 Au-dessus . . . 80 »

CEINTURE DE GROSSESSE du Dr Pinard

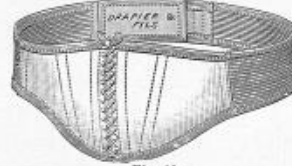


Fig. 38

Ceinture pour les cas de relâchement des parois de l'abdomen par suite de grossesses multiples chez les femmes enceintes.
 Ordinaire 40 » | Fine . 60 » | Soie . 80 »

CEINTURES POUR RELACHEMENT DES SYMPHYSES

Ceinture de Martin . . . 60 »
 Ceinture de Tarnier, en cuir moulé avec tige de réglage taroudes . . . 150 »
 Ceinture du Dr Mayet, pour le relâchement des symphises . . . 400 »

CEINTURE autoclé du Dr Auvard

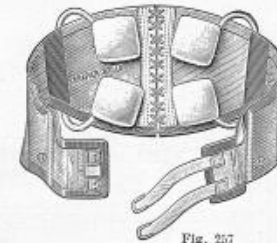


Fig. 257

La ceinture autoclé du Dr Auvard avec 4 coussins pneumatiques séparés, permet d'agir sur le tête et le siège du fœtus, et maintient celui-ci dans la position voulue.

Ordinaire . . . 65 » | Fine . . . 85 »
 Soie . . . 100 »

Nota. — Les pelotes, sous-cuisses ou accessoires quelconques se paient en plus, leur emploi étant irrégulier. (Voir accessoires page 23).

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

CEINTURES ABDOMINALES

Ces ceintures sont destinées à un maintien simple de l'abdomen : Suites de couches, ptose légère, antéversion, obésité, varices de l'abdomen, etc.

Ceinture abdominale simple

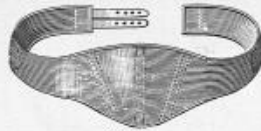


Fig. 26.

Tissu élastique	Ordinaire	12 »
	— 1 ^{re} qualité	15 »
	Tissu demi-fin	25 »
	Tissu fin	40 »
Tissu non élastique	Soie	60 »
	Ordinaire	15 »
	Fin	25 »
	Demi-soie	40 »

Ceinture abdominale double



Fig. 27.

Cette ceinture à l'aide de la double patte venant se rattacher en avant, exerce une compression un peu plus énergique que la fig 26, qui se forme en arrière par 2 pattes. Dire quel genre de fermeture l'on préfère.

Mêmes prix que ceux de la figure 26.

NOTE : Lorsque ces ceintures sont employées pour abaissement de l'utérus, antéversion, on place à la base de la ceinture une pelote en forme de croissant. Voir page 23.

Ceinture du Dr Pozzi

Recommandée surtout pour l'été et les pays chauds et pour les personnes sensibles.



Fig. 28.

Le ventre de cette ceinture est en passementerie à jour et les côtés en tissu élastique.

Ordinaire 30 » | Fine 40 » | Soie 60 »

Ceinture de compression méthodique du Dr Courty

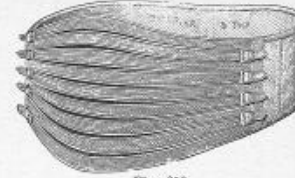


Fig. 258.

Ordinaire 35 »
Fine 60 »

Ceintures contre l'Obésité

Ceinture pour compression renforcée



Fig. 96.

Cette ceinture entièrement en tissu rigide est applicable surtout chez les obèses et dans les éventrations légères.

Ordinaire :	
Jusqu'à 26 cent. de haut. de ventre	60 »
Au-dessus	70 et 80 »
Fine :	
Jusqu'à 26 cent. de haut. de ventre	80 »
Au-dessus	100 »

Ceinture-sangle modifiée modèle Drapier et Fils

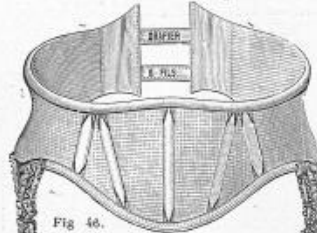


Fig. 46.

Cette ceinture est entièrement faite en tissu élastique très résistant. Elle donne un maintien énergique mais plus doux que celui des ceintures en tissu rigide.

Ordinaire 40 » | Fine 60 »
Soie, suivant taille 80 et 100 »

Ceinture pour hommes avec sous-ventre modèle Drapier



Fig. 186.

Ceinture pour hommes en coutil fort avec goussets élastiques, et 3 pattes par derrière, celle du milieu vient se rattacher en avant sur un sous-ventre de façon à remonter la masse abdominale.

Ordinaire, 40 » | Fine 50 »
Soie, suivant tailles. 60 et 80 »

Ceintures en caoutchouc pur



Fig. 86.

Cette ceinture est tout en gomme pure et employée spécialement pour le traitement par la compression et la sudation forcée, parallèlement au massage.

Prix suivant tailles, depuis 35 »

CEINTURES POUR ÉVENTRATION. Voir page 15.

CEINTURES HYPOGASTRIQUES

ENTÉROPTOSE — REIN MOBILE

CEINTURES du PROFESSEUR ALBERT ROBIN (Modèles de l'Hôpital de la Pitié).

Ceinture du P^r Albert Robin
Modèle n° 1



Fig. 42

Ordinaire (prix y compris les sous-cuissées) . . . 40 »
Fine 50 »
Extra-fine 70 »
Supplément pour les 2 pelotes 10 »

La ceinture modèle n° 1 est en tissu rigide avec goussets élastiques latéraux. Les lacures supérieures permettent des modifications de forme. Cette ceinture donne un soutien parfait du bas-ventre analogue à la sangle de Glénard sans avoir les inconvénients de la forme droite des sangles qui gênent aux plis des cuisses.

Ceinture-Sangle du D^r Glénard

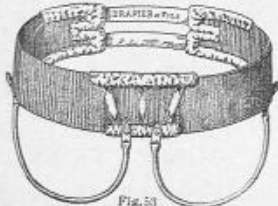


Fig. 53

En tissu cordonné non élastique . . . 15 »	En tissu élastique Vulcanisé ordig ^m . . . 30 »
Ordinaire 25 »	Coton maille surat . . . 35 »
Fin 50 »	1/3 soie 35 »
Soie 50 »	Soie 45 »

La Ceinture-Sangle de Glénard est d'une forme absolument droite, le ventre plat. Elle se place immédiatement au-dessous du pubis; l'écart de la ceinture en arrière doit être de 15 à 20 c. Cette ceinture ne se fait que jusqu'à 16 cent. de hauteur maximum.

Ceinture du P^r Albert Robin
Modèle n° 3



Fig. 43

Coton (prix y compris jarretelles ordinaires) 30 »
Soie (prix y compris jarretelles) (fig. 43) 60 »

La ceinture modèle n° 3 est entièrement construite en tissu élastique; elle convient aux personnes sensibles qui n'ont besoin que d'un léger maintien.

Ceinture-Sangle écharnée mod. Drapier et Fils

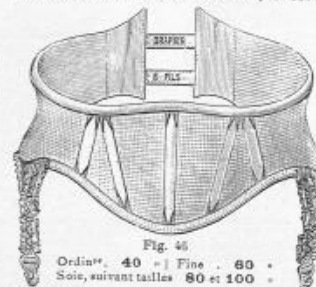


Fig. 46

Ordin^m . . . 40 » | Fine . . . 60 »
Soie, suivant tailles . . . 80 et 100 »

La Ceinture-Sangle écharnée de Drapier et Fils est entièrement en tissu élastique très résistant et le ventre est absolument plat; elle remplace avec avantage la sangle de Glénard, ne blessant pas comme cette dernière sur les cuisses qu'elle dégage entièrement.

NOTA : Les pelotes, sous-cuissées ou accessoires quelconques se paient en plus, leur emploi étant irrégulier. (Voir prix des accessoires, page 25).

Ceinture à ressorts du P^r Albert Robin
Modèle n° 4



Fig. 55

Ordinaire 35 »
Fine 60 »
Extra-fine 70 »

La ceinture modèle n° 4 est composée d'une partie ovale en cuir avec 2 rembourrages latéraux formant pelotes, le tout maintenu par des ressorts souples comme dans un bandage. Ce maintien n'embrasse que la base de l'abdomen, il est souple et se dissimule entièrement même sous un maillot.

Ceinture hypogastrique du D^r Jayle

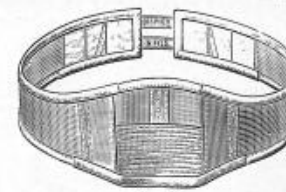


Fig. 259

Ordinaire 40 »
Fine 50 »
Soie 60 »

Cette ceinture est composée d'une partie médiane formée de ressorts souples superposés de forme concave et terminés en haut par une partie élastique, les côtés sont élastiques. Cette ceinture est surtout indiquée chez les sujets très maigres au ventre presque concave, chez lesquels les ceintures plates n'ont aucune action par suite du point d'arrêt que forment les crêtes iliaques.

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

CEINTURES HYPOGASTRIQUES (Suite).

Ceintures-Maillot

pour ENTÉROPTOSE - REIN MOBILE

NOTA. — Sur la demande de MM. les Docteurs, nous envoyons nos essayures à domicile sans augmentation. Pour la Banquette et la Province, nous demandons une indemnité de déplacement.



Fig. 260.

CEINTURE MAILLOT

Qualité ordinaire (sans jarretelles)
Tissu à côtes ou tulle fort (avec jarretelles)
— ou tulle fin (fil ou coton)
Simili soie
Soie ordinaire
— fine
En laine pour avoir compression, Tissu fort et chaleur / Tissu fin.

jusqu'à 90 c/m de haut.	de 21 à 24 c/m inclus de haut.
20	25
30	35
40	45
50	55
60	70
80	90
40	45
50	55



Fig. 261.

CEINTURE MAILLOT en tissu à jour pour l'été et les pays chauds

Tissu à jour, fort
— fin, fil ou coton
Simili soie
Claturé en arrière du haut, supplément.
— du haut et du bas, —

jusqu'à 90 c/m de haut.	de 21 à 24 c/m inclus de haut.
30	35
45	50
55	60
5	
10	



Fig. 262.

Sujet vu avec une ceinture-maillot et un soutien-gorge.

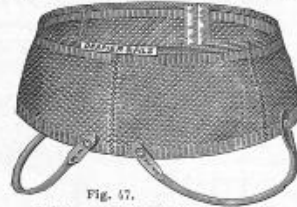


Fig. 47.

Ceinture-Maillot du Docteur Cuffer.

La Ceinture-maillot du Dr Cuffer est faite d'un tissu très souple, elle ne dépasse jamais 30 c/m de haut et est lacée par derrière. Elle convient aux personnes très sensibles ayant besoin d'un léger soutien; nous doublons l'étoffe en bas sur les côtés afin de donner un maintien plus fort à la base de l'abdomen.
Ordinaire 30 fr. | Fine 40 fr.
Soie 80 * | Soie Extra-fine 90 *

Les ceintures-maillots diffèrent des autres modèles de ceintures par l'absence des pattes ou boucles, c'est un véritable fourreau en tissu élastique que l'on enfle par les jambes. Elles sont souples, peu encombrantes et d'un bon soutien. Ces ceintures peuvent néanmoins, sur demande, être lacées ou bouclées.



Fig. 263.

CEINTURE MAILLOT cintrée en arrière

Mêmes prix que les ceintures Fig. 260 et 261, avec augmentation de 5 fr. pour le cintre. — Pour les ceintures cintrées haut et bas, Augmentation 10 fr.



Fig. 57.

Corset-maillot en tissu élastique

Le corset-maillot est d'une seule pièce et s'enfile par les jambes, on peut aussi le lacé. Il remplace avantageusement le corset pour les personnes sensibles qui ne peuvent supporter celui-ci; il moule parfaitement toutes les formes et adapté avec un soutien-gorge (voir page 24). Il donne une esthétique parfaite.

Hauteur 25 à 30 c/m.	Hauteur 30 à 50 c/m.
30	40
40	50
50	60
60	70
80	90
100	110
45	55
55	65
100	120

Pour les pelotes pour rein mobile et accessoires divers à ajouter, voir page 23.

CEINTURES HYPOGASTRIQUES (Suite)

ENTÉROPTOSE

Corset-Ceinture du Dr Le Dentu pour rein mobile.



Fig. 50

Le corset-ceinture du Dr Le Dentu est entièrement en tissu élastique, il moule entièrement l'abdomen et dégage le pli des cuisses.

Ordinaire	50 »
Fin	80 »
Soie	150 »

Ceinture du Dr Guibout

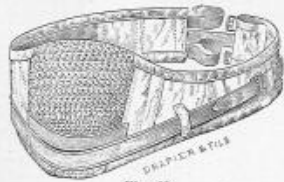


Fig. 59

La ceinture du Dr Guibout est composée dans sa partie médiane d'un tricot souple, les côtés sont en coutil, elle se boucle par 2 parties derrière, une contre-partie élastique passe sur le bord inférieur et vient se boucler en arrière.

Ordinaire	40 »
Fine	50 »
Soie	70 »

CORSET-CEINTURE



Fig. 187

Ordinaire 90 »	Fin . 120 »
Soie	150 et 180 »

Le corset-ceinture modèle Drapier & Fils supprime la ceinture et le corset en deux parties. Il convient surtout aux personnes soucieuses d'allier l'élégance au souci d'une contention efficace. Le corset est d'une coupe parfaite et la sangle abdominale qui est dissimulée dedans permet un maintien réglable à volonté.

Ceinture hypogastrique du Dr Dalché



Fig. 44

Cette ceinture est entièrement en tissu rigide. Le ventre a une forme très remontante et est absolument plat. Des lacures latérales permettent de varier son orientation.

Ordinaire 25 »	Fine 35 »	Soie 50 »
----------------	-----------	-----------

NOTA. — Les pelotes, sous-cuisses ou accessoires quelconques se paient en plus, leur emploi étant irrégulier. (Voir prix des accessoires: page 25).

REIN MOBILE (Suite)

Ceinture du Dr Tuffier pour rein mobile



Fig. 54

La ceinture du Dr Tuffier est composée d'une pelote ayant la forme d'un gros haricot sur lequel est monté un ressort souple de Dolbeau; une ceinture légèrement matelassée terminée par une partie élastique relie les 2 bouts du ressort.

Ordinaire	35 »
Fine	45 »

Ceintures Hypogastriques à ressorts et à clefs



Fig. 60

La clé située au milieu de la pelote permet de faire prendre à celle-ci un angle de compression qui peut être varié à volonté.

Ordinaires, garniture chamois depuis . . .	35 »
Fines, garniture chevreau	50 »
Fines damasquinées	60 »
A modérateur, brevetées S. G. D. G. . . .	75 »

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

CEINTURES POST-OPÉRATOIRES

Ceinture pour cure radicale



Fig. 394.

La ceinture pour cure radicale embrasse par son prolongement toute la région inguinale, une matelassure très douce et très plate recouvre la cicatrice.

Pour un côté		Pour les deux côtés	
Ordinaire	25 »	Ordinaire	30 »
Fine	35 »	Fine	40 »
Soie	60 »	Soie	65 »

Bandages pour cure radicale, voir page 12.

Ceinture pour suite d'opération d'appendicite

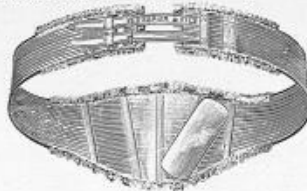


Fig. 395.

La ceinture pour suite d'opération d'appendicite assure le maintien de l'abdomen, une matelassure très moelleuse et absolument plate recouvre la cicatrice; dans certains cas nous ajoutons une plaque en aluminium sous le coussinage.

Ordinaire	25 »	Fine	35 »
Extra-fine	45 »	Soie	60 »

NOTA. — Nous employons également pour suite d'opération d'appendicite et de laparotomie, les ceintures-maillot page 21 dans lesquelles nous mettons un coussin moelleux et plat sur le trajet de la cicatrice. Lorsque les cicatrices post-opératoires s'accompagnent d'une notable dilatation ou d'un peu d'éventration, nous ajoutons au coussinage une plaque en aluminium avec ressort de Doibeaux (voir fig. 267). Supplément: 12 francs.

Ceinture pour suite d'opération de laparotomie

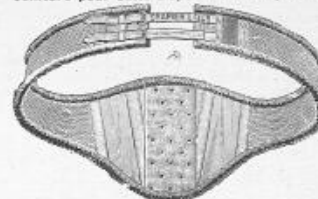


Fig. 396.

La ceinture pour laparotomie embrasse tout l'abdomen, un coussin central, plat et moelleux recouvre la totalité de la cicatrice.

Ordinaire	30 »
Fine	45 »
Soie	70 »

ACCESSOIRES pour CEINTURES

Fig. 265.



Croissant hypogastrique sur plaque aluminium pour antéversions, 3 grandeurs, garniture en peau de chamois. 4 »
Garniture en peau d'agneau. 5 »
La même (fig. 265), en caoutchouc par gonflé à l'air, sur plaq. métal et robinet. 8 »
Pour les pelotes pour hernies ombilicales destinées à être cousues dans les ceintures, voir la NOTA* du bas de la page 24.

Fig. 266.



Pelote pour le rein mobile forme haricot sur plaque aluminium, 3 grandeurs, garniture en peau de chamois. 5 »
Garniture en peau d'agneau. 6 »
Pelote pour le rein mobile, forme ovoïde, même prix que la forme haricot.
Pelote pour le rein mobile forme haricot, en caoutchouc par (fig. 266), gonflée à l'air, avec collerette plaque métal et robinet. 8 »

Fig. 267.




Pelotes rondes ou ovales sur ressort Doibeaux (fig. 267), destinées à augmenter la compression sur un point à volonté, monté avec son tirage de rappel.
Garniture en peau de chamois. 12 »
Garniture en peau d'agneau. 14 »

Fig. 268.



Sous-cuisses en tube de caoutchouc pur renforcé, montés avec pattes en cuir à boutonsnières, la paire. 2 50
Les mêmes avec pattes en soie, boutonsnières à la main, la paire. 4 »

Fig. 269.

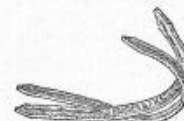

Sous-cuisses en tricot à la main, pouvant se laver, très doux et extensibles, en coton, la paire. 2 »
En soie, la paire. 5 »

Indiquer la longueur des sous-cuisses et la grandeur des personnes.

CORSETS DE TOILETTE

Pour CORSETS-CEINTURES, voir page 22

Dans la fabrication des corsets de toilette, nous nous sommes efforcés d'établir des types alliant l'élégance à l'hygiène et au confort. Nous nous sommes particulièrement spécialisés dans la fabrication des corsets destinés aux personnes sensibles ou délicates supportant difficilement les corsets ordinaires.

Corsets de Toilette (fig. 270) en tous tissus
 Coutil ordinaire = 40 »
 Tissu fantaisie = 60 »
 Batiste fine = 100 »
 B. oché soie = 80 »
 Batiste ordinaire = 80 »

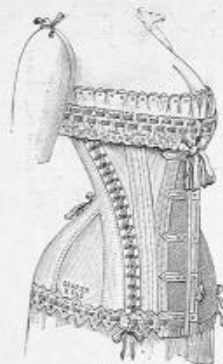


Fig. 149.

Corsets de Grossesse (fig. 143)
 en coutil, lacures latérales, devant élastique et busc impératrice.
 Ordinaire = 60 »
 Tissu fantaisie = 80 »
 Coutil broché soie ou batiste = 100 »

Corsets de grossesse
 en cordonnet tricoté simili soie, avec lacures latérales et busc impératrice. Modèle recommandé par sa douceur.
 Cordonnet ordinaire = 80 »
 Cordonnet fin = 100 »
 Cordonnet soie = 140 »
 Se fait en toutes nuances.

Bouteilles de Corsets pour la grossesse en une ou deux pièces.
 Ordinaire | Fin = 8 »
 Avec busc "Impératrice" . . . = 8 »

Corset de Toilette
 en jersey pékin souple. Ce tissu est moins solide que le cordonnet.
 Ordinaire = 55 »
 Fin = 70 »
 Soie = 100 »



Fig. 270.

Corset de Toilette (fig. 270), en cordonnet tricoté simili soie, souple et résistant à la fois, indispensable aux personnes désirant un corset souple. Se fait en toutes nuances.
 Cordonnet ordiⁿ = 60 » ; Maille fine = 80 » ; Soie = 120 »

CORSETS pour les SPORTS

Petit Corset de Sport en tissu cordonnet simili soie, très souple et résistant à la fois, hauteur 23 c/m. avec 2 jarretel en devant.
 Toutes nuances.
 Ordinaire = 25 »
 Fin = 35 »
 Soie = 50 »



Fig. 271.

Soutien-gorge (fig. 271) en simili soie, maille à dents. Toutes nuances.
 Ordinaire | Fin = 16 »
Soutien-gorge monté en simili-soie
 Ordinaire | Fin = 30 »
Soutien-gorge en forme = 35 »

Brassières
 modèle **Drapier et fils** spéciales pour soutenir les seins et supporter les jupons chez les personnes qui ne peuvent, par suite de faiblesse, supporter le corset.
 Depuis 30 »

MESURES
 pour soutien-gorge.
 Donner la circonférence de la personne en passant sur les seins.



Fig. 272.

Seins artificiels
MESURES
 Donner la mesure de haut et de la largeur du sein restant. Circonférence de poitrine.

Seins artificiels
 En caoutchouc moulé gris, la pièce 12 »
 En caoutchouc souple rose sur toile, se gantant à volonté, avec robinet. Pour un sein = 25 »
 Pour les deux seins (fig. 272) = 40 »


MESURES A FOURNIR POUR LES CORSETS
 (Prendre les mesures étant corsetée)
 Tour de poitrine. Tour de taille. Tour de bassin. Hauteur du busc
 Hauteur des côtés. — Des aisselles à la taille. D. la taille aux hanches.
 Hauteur derrière. — Du dos à la taille. De la taille au bas.
 La personne est-elle grande, moyenne ou petite?

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

Manière de prendre les mesures

Prendre le tour de la jambe aux endroits indiqués par les numéros du croquis.

Pour une chaussette	de 1 à 4
— mollette	de 3 à 6
Pour un bas ordinaire	de 1 à 6
— bas à genou. (Voir renseignements complémentaires ci-dessous.)	de 1 à 9
— bas à cuisse. (mentaires ci-dessous.)	de 1 à 13
Pour une mollette à genou	de 3 à 9
Pour une genouillère	de 6 à 9

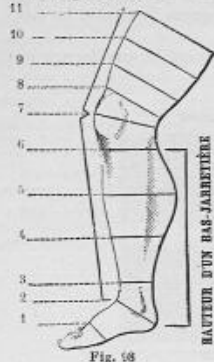

Mesures de hauteur

Les mesures de hauteur se prennent du sol jusqu'à la jarretière pour les bas-jarretières. Donner aussi la taille de la personne (grande, moyenne, petite).

Pour les bas à genou : Donner 1° La hauteur du milieu du cou-de-pied devant jusqu'au milieu de la rotule.

2° La circonférence de la cuisse à 15 c/m du milieu de la rotule.

Pour les bas à cuisse : Donner 1° La hauteur du milieu du cou-de-pied devant jusqu'au milieu de la rotule.

2° La circonférence de la cuisse prise à 15 c/m du milieu de la rotule.

3° La circonférence de la cuisse prise à 25 c/m du milieu de la rotule.

4° La circonférence à 30 c/m du milieu de la rotule.

5° Donner la hauteur du milieu de la rotule jusqu'à l'endroit de la cuisse où l'on désire que le bas s'arrête.

Renseignements à fournir en commandant des bas

Quel sexe ? Masculin. Féminin.

Êtes-vous enceinte et de combien de mois ?

Quel âge ?

De quelle nature sont vos varices (externes, internes, suite de phlébite, coup de foudre, etc.) ?

Où pour quelle affection (entorse, hydarthrose, suite de fracture, épanchement de synovie, etc.) ?

Avez-vous déjà porté des bas ?

Quel est votre travail habituel ?

Êtes-vous ordinairement debout ou assis ?

Y a-t-il plaie de la jambe et à quel endroit ?

Y a-t-il parfois enflure et à quel endroit ?

Y a-t-il parfois démangeaisons ?

Jusqu'à montent vos varices ?

Êtes-vous de grande, moyenne ou petite taille ?

Êtes-vous de nature grasse ou maigre ?

Est-ce pour la jambe droite ou la jambe gauche ou pour les deux ?

Lorsque le bas est lécé indiquer de quel côté on désire le lécage.

Les mesures et indications sont conservées sur un registre spécial pour les commandes suivantes.

BAS ÉLASTIQUES



Fig. 288 Ouvrier tissant un bas élastique sur le métier.

FAÇON DE CHAUSSER LES BAS

Les bas élastiques se chaussent comme les bas ordinaires, en retournant le pied et en les rentrant jusqu'au talon ; ensuite on les tire peu à peu jusqu'à complète application ; chez les variqueux qui transpirent beaucoup des pieds il y aura avantage à pondrer, au préalable, avec de la poudre de talc.

RECOMMANDATION

Les corps gras, huile ou pomadier, ainsi que la teinture d'iode, décomposent le caoutchouc et en abrègent la durée ; quand on doit s'en servir, il faut mettre assés de linge entre la peau et le bas pour le garantir des taches.

BLANCHISSAGE ET RÉPARATIONS DES BAS ET BANDES ÉLASTIQUES

Le blanchissage doit se faire de la façon suivante : Laisser tremper le bas toute une nuit dans de l'eau de son tiède. Le lendemain, le savonner franchement, mais sans brosse ; le rincer ensuite plusieurs fois à l'eau froide et laisser sécher à l'ombre.

La Maison se charge du blanchissage et de la réparation des bas


NOTA. — Sur la demande de MM. les Docteurs, nous envoyons prendre mesures dans Paris sans augmentation de prix. Pour la Banlieue et la Province, nous demandons une indemnité de déplacement.

NOS TISSUS DE BAS ÉLASTIQUES

Lorsque le genre de tissu du bas que l'on désire ne nous est pas indiqué, nous choisissons le tissu qui convient le mieux au cas et au genre de travail du sujet et suivant les indications que nous donnent les renseignements que nous demandons à la page 25.

Pour la compression des varices, en général, nous employons les tissus tulle, français ou à côtes de préférence au tissu anglais qui ne convient que dans quelques cas spéciaux par suite de la constriction un peu brutale de sa maille et qui, de plus, est moins solide que les autres genres de tissus. Le tissu anglais ne sera utilisé avec avantage que pour les bas en soie.

Pour les jambes extrêmement sensibles, les suites de phlébite, etc., qui demandent une compression très douce, on donnera la préférence aux tissus tulle et à côtes qui sont d'une grande douceur.

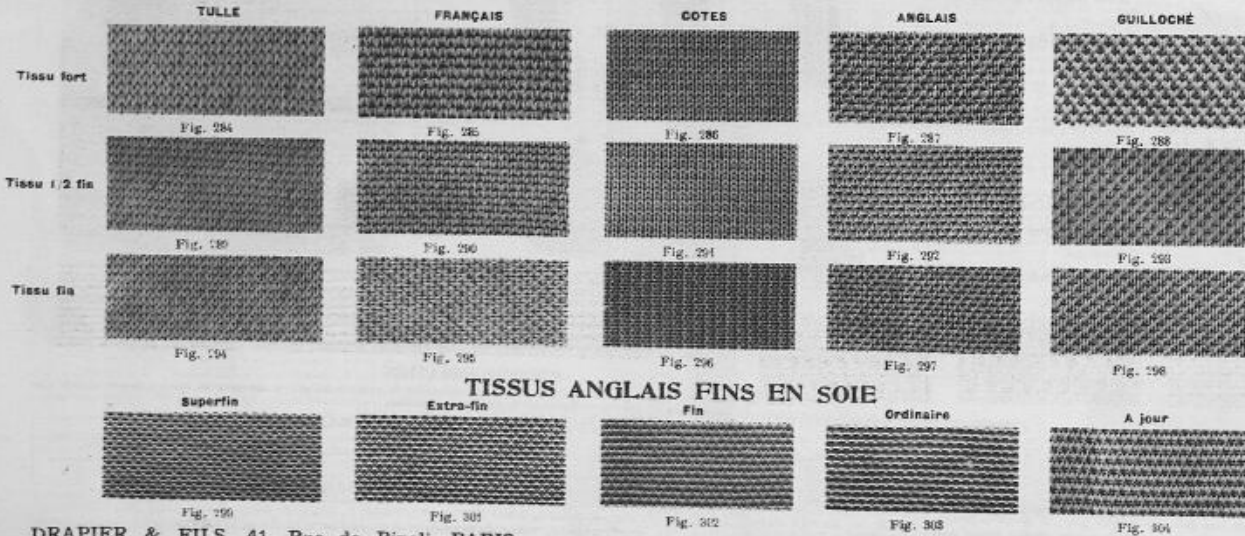

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

TARIF des BAS en COTON
(Tissus, page 26) écus avec couture.

NOTA. — Les bas de 3^e et 4^e qualité ne se font pas en fin et demi-fin.
Les bas en tissu guilloché ne se font qu'en 1^{re} et 2^e qualité seulement.
Les bas en fil ne se font qu'en 1^{re} et 2^e qualité seulement.
Les bas en 5^e qualité ne se font pas sur mesure et seulement en bas jarretière.

	1 ^{re} qualité	2 ^e qualité	3 ^e qualité	4 ^e qualité	5 ^e qualité
Bas élastique montant jusqu'à la jarretière (fig. 374), la pièce	14 »	12 »	10 »	8 »	5 50
Chaussette élastique (fig. 375), la pièce	12 »	10 »	8 »	6 »	—
Mollelière — (fig. 376), —	12 »	10 »	8 »	6 »	—
Genouillère — (fig. 377), —	12 »	10 »	8 »	6 »	—
Mollelière à genou élastique, montant à 15 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce	22 »	18 »	15 »	12 »	Le bas à 5 50 est un bas en tissu anglais
Mollelière à cuisse (fig. 378), montant de 16 à 30 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce	25 »	21 »	18 »	15 »	—
Bas à genou montant à 15 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce	30 »	25 »	20 »	17 »	—
Bas à cuisse (fig. 379), montant de 16 à 30 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce	35 »	30 »	25 »	20 »	—

Les bas dépassant la jarretière comportent un dispositif d'attache dans le haut pour diminuer l'effet de glissement qui se produit toujours dans les grands bas à cause du pli du jarret.

BAS LACÉS : Tous les bas peuvent être faits lacés. Ajouter 2 francs de supplément, par pièce, aux prix ci-dessus pour les bas jarrettières, mollelières, genouillères, chaussettes et 4 francs de supplément, par pièce, pour les bas et mollelières à genou et à cuisse.


Pour Mesures, voir page 28.

BAS en TISSU à JOUR
Fil et coton écu avec couture.

supprimant la chaleur et les démangeaisons ; spéciaux pour l'été et les pays chauds.


Tissu ajouré fin

Fig. 305

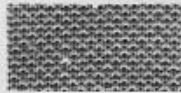

Tissu moyen à jours

Fig. 306

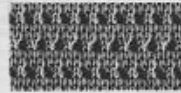

Tissu fin à jours

Fig. 307



Bas-jarretière, la pièce	14 »	15 »	20 »
Mollelière, genouillère ou chaussette, la pièce	12 »	12 »	15 »
Bas à genou montant à 15 c/m au-dessus de la rotule, la pièce	30 »	25 »	35 »
Bas à cuisse — de 16 à 30 c/m au-dessus de la rotule, la pièce	35 »	30 »	40 »

— Pour les bas à jour en soie, voir ci-dessus tarif des bas en soie.



Bas élastique sans couture

TARIF des BAS en SOIE
(Tissus, page 26.)

Coloris : Blanc, Réséda, Ecu, Gris perle, Rose, Chair, Mauve, Noir.
NOTA : Les bas de soie noire ne pouvant se faire qu'avec des soies spéciales, subissent une augmentation de 20 0/0 sur les prix des autres coloris.

	Superfin	Extra-fin	Extra-fin à jours	Fin	Ordinaire
Bas de soie montant jusqu'à la jarretière (fig. 374), la pièce	35 »	25 »	28 »	20 »	16 »
Chaussettes de soie (fig. 375), la pièce	20 »	18 »	19 »	14 »	12 »
Mollelières — (fig. 376), —	25 »	17 »	20 »	14 »	12 »
Genouillères — (fig. 377), —	25 »	18 »	22 »	14 »	12 »
Mollelières à genou en soie, montant à 15 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce	45 »	33 »	37 »	27 »	19 »
Mollelières à cuisse en soie, montant de 16 à 30 c/m au-dessus du milieu de la rotule, (fig. 378), la pièce	60 »	42 »	47 »	33 »	27 »
Bas à genou en soie montant à 15 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce	80 »	42 »	45 »	33 »	27 »
Bas à cuisse en soie, montant de 16 à 30 c/m au-dessus du milieu de la rotule (fig. 379), la pièce	80 »	50 »	55 »	40 »	33 »


(*) Ce tissu n'est pas aussi solide que les tissus non ajourés.

BAS LACÉS EN SOIE : Ajouter aux prix des bas de soie ci-dessus :
8 francs de supplément par pièce pour les bas-jarrettières ;
5 — — — — — pour les genouillères, mollelières, chaussettes ;
10 — — — — — pour les bas à genou ;
12 fr. 50 — — — — — à cuisse.

BAS SANS COUTURE

Tissu fort

Fig. 308

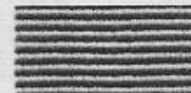

Tissu moyen

Fig. 309



Tissu fin

Fig. 311



Le bas sans couture est un bas à pression très énergique, il ne peut convenir à la majorité des varicoteux ; on peut l'employer chez des sujets fatigués beaucoup et désirant un fort soutien ou encore chez certaines personnes sensibles du talon et chez lesquelles la couture est mal supportée. Le bas sans couture est beaucoup plus durable que le bas avec couture.

	Tissu fort ou moyen	Tissu fin
Bas-jarretière en coton sans couture	18 »	20 »
Chaussettes, mollelières, genouillères en coton sans couture	14 »	16 »

— Nous ne faisons pas le bas sans couture montant au-dessus du genou, car il est mal toléré par les varicoteux.

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

APPAREILS DE COMPRESSION en peau de chien



Fig. 311

Les appareils de compression en peau de chien sont surtout employés pour tenir des passements et pour suites d'entorses, arthrites, faiblesse articulaire.

Bas lacé en peau de chien
Chaussette
Genouillère
Mollelière.

Pour mesures, voir page 25 et indiquer la jambe malade ainsi que le côté où l'on désire lacer.

ORDINAIRE	DOUBLE EN CHAMBRÉS
25	32
15	20
15	20
15	20

Ces articles est plus doux que l'ordinaire.

Bande Drapier n° 1 pour compression ordinaire
Fig. 313



Bande Drapier n° 1, largeur 6 c/m. Le mètre . . . 2
8 c/m. . . 2.50

Bandes Drapier et Fils à trame de caoutchouc n° 1 ou 2

Pour bander jusqu'à la jarretière, longueur 3 m. 50, la pièce . . . 8
Pour bander jusqu'au-dessus du genou longueur 5 mètres, la pièce . . . 11
Pour bander jusqu'à la cuisse, longueur 7 mètres, la pièce . . . 15

Bandes du Docteur Tennesson, composées de lanières de 6 m. 30 environ, ajoutées bout à bout. Chaque lanière . . . 1.50

POUR PERSONNE MOYENNE Largeur 6 c/m		POUR PERSONNE GROSSE larg' 8 c/m	
Coton	Soie	Coton	
8	22	10	
11	31	13.50	
15	43	18.50	

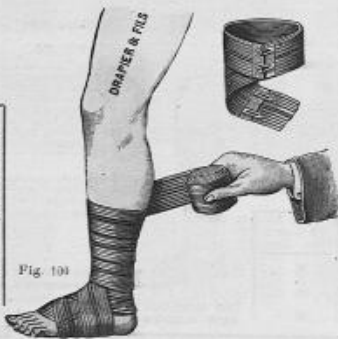


Fig. 104

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

GENOUILLÈRES POUR DOULEURS et Rhumatismes

Genouillères en tissu élastique ouaté, donnant compression et chaleur.

La pièce (fig. 312) . . . 12

Genouillères en laine d'angora sans élastique

La pièce . . . 20

Genouillères en peau de chat.

La pièce . . . 25

Genouillères en peau de chat doublées flanelle à l'extérieur.


La pièce . . . 30



Fig. 312

Pour mesures, voir page 25. — Pour les genouillères en peau de chat, indiquer pour quelle jambe et le côté où l'on désire lacer.

Bande Drapier n° 2 pour compression douce et pour les personnes craignant la chaleur. Fig. 314

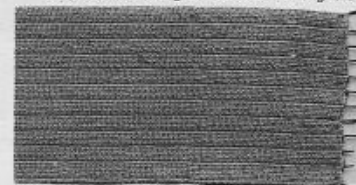

Bande Drapier n° 2, largeur 6 c/m. Le mètre . . . 2
8 c/m. . . 2.50

Nous avons établi deux types de bandes correspondant aux indications les plus courantes et d'une souplesse différente, la qualité du caoutchouc employé leur permet de se prêter aux nécessités des pressions les plus diverses. Les bandes sont très appréciées par les spécialistes qui les préfèrent de beaucoup aux bandes dites de "Crêpe" car les bandes de crêpe n'ayant aucune parcelle de caoutchouc, seule matière susceptible de fournir une élasticité durable, se détendent rapidement et exercent bientôt une compression brutale.

Pour la facilité de la mise en place, nos bandes figurent au tarif ci-contre possédant un écrier tout cousu et notre mode de fermeture de haut simple et ingénieux (fig. 100), supprime l'épingle toujours dangereuse. Une instruction détaillée pour le mode d'emploi et le nettoyage accompagne chaque bande.

Bandes en crêpe marque Willot ou Velpeau, larg' 5 c/m. Le mètre = . 95
7 c/m. = 1.25
10 c/m. = 1.65


Bandes entièrement en caoutchouc pur pour eczéma variqueux, larg' 6 c/m. Le mètre . . . 2
Bandes entièrement en caoutchouc pur pour eczéma variqueux, larg' 7 c/m. Le mètre . . . 2.50

SUSPENSOIRS

HYDROCÈLE — VARICOCÈLE — EPIDIDYMITE

Mesures et renseignements à fournir. — Donner le tour du corps de la personne, pris sur le gros des hanches; la taille de hauteur et le volume approximatif des parties (petites, moyennes ou grosses).

Suspensoirs Poches mobiles avec ou sans sous-cuisses

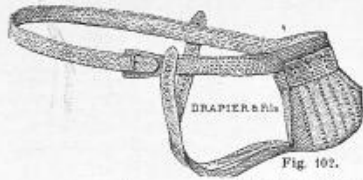


entièrement tricotés à la main, brevetés s. g. d. g., sans couture, en coton, en fil et en soie.

Ces suspensoirs, d'un nettoyage facile, sont aussi doux que d'un bon maintien. Le dispositif de leur moyen d'attache, composé de trois rangées de boutonnières, permet la variation de leur taille et de leur forme.

Prix des Poches (Le n° 9 correspond à la taille moyenne). (Le n° 24 correspond au volume d'une tête d'enfant).	EN COTON OU EN FIL		AVEC SOUS-CUISSSES	SANS SOUS-CUISSSES
	jusqu'au n° 9	3	5	3.50
du n° 10 au 14	4	6	4	3.50
du n° 15 au 18	5	7	5	4
du n° 19 au 20	6	8	6	5
du n° 21 au 24	7	9	7	6
du n° 25 au 30	8	10	8	7
du n° 30 au 35	9	11	9	8
	EN SOIE		8	7
	Plus grandes, 9 francs et au-dessus.			
Prix des Ceintures	Elastiques étroites	2	Tricotées coton 1/2 larges	4
	— larges	3.50	— larges	5
	— soie	4	Tricotées soie	8

Suspensoirs Poches fixes avec ou sans sous-cuisses

Ces suspensoirs, en tricot au métier, se construisent avec ceintures entièrement en toile ou demi-élastiques et se font en plusieurs qualités.

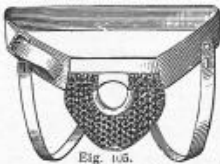

2 ^e Qualité (cru)	Ceinture toile, jusqu'au n° 4	1.25
	— taille hydrocèle, n° 5 au 9	1.50
1 ^{re} Qualité (gris fort)	Ceinture 1/2 élastique, jusqu'au n° 4	1.50
	— taille hydrocèle, n° 5 au 9	1.75
Blancs.	Ceinture toile, jusqu'au n° 4	2
	— taille hydrocèle, n° 5 au 9	2.50
Soie rose.	Ceinture 1/2 élastique, jusqu'au n° 4	3
	— taille hydrocèle, n° 5 au 9	3.50
	Ceinture toile blanche, jusqu'au n° 4	4
	— taille hydrocèle, n° 5 au 9	4.50

Nettoyage. — Laisser tremper les suspensoirs dans de l'eau de son tiède pendant une nuit, savonner ensuite légèrement, rincer à l'eau froide plusieurs fois et laisser sécher à l'ombre.

Suspensoirs Poches mobiles avec ou sans sous-cuisses tricot au métier

Dans ces suspensoirs, la poche indépendante se boutonne ou s'agrafe à la ceinture élastique. Possédant deux rangées d'œillets ou de boutonnières, on peut varier la grandeur de la poche.

Lorsque la poche est sans sous-cuisses, elle est bordée d'élastique à sa partie arrière pour assurer la bonne contention.

Prix des poches, du n° 1 au 4 1.50

— taille hydrocèle, du n° 5 au 9 2

Prix des ceintures 1.50

En qualité secondaire, nous fabriquons des suspensoirs dont la ceinture passe dans la lèze de la poche disposée en coulisseau.

Prix des poches, jusqu'au n° 4 1

— taille hydrocèle, du n° 5 au 9 1.25

Prix des ceintures, en tissu élastique 1




Suspensoir modèle Drapier et Fils spécial pour tous les Sports (MODÈLE DÉPOSÉ)

Ce suspensoir, entièrement construit en tissu élastique large et très souple, assure une parfaite contention des parties qu'il ramène en avant et relève sur le pubis, les mettant ainsi à l'abri de tous les chocs et assurant une suspension très affective, sans aucune gêne dans les exercices les plus difficiles ou les plus violents.

Par son adaptation et sa construction spéciales, n'étant pourvu d'aucun bouton, agrafe ou boucle, il se moule complètement au corps et se dissimule même sous un maillot. Ce suspensoir est employé avec succès par tous les cyclistes, jockeys, gymnasiarques et, en général, par tous les professionnels des sports.

Suspensoir Drapier et Fils, coton écru 6.50

Suspensoir en soie 12

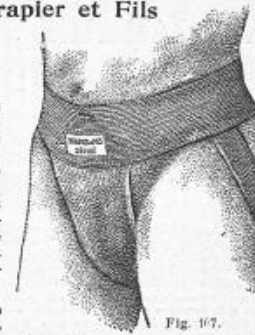

SUSPENSOIRS (Suite)

ORCHITE

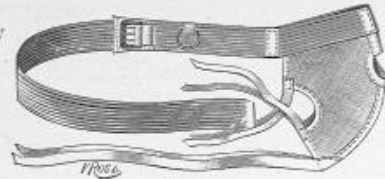


Fig. 273.

Suspensoir du docteur Horand. Ce suspensoir est destiné à la suspension absolue et à la compression du scrotum; il est fourni avec un tissu imperméable amovible. 6 »

ECZEMA DU SCROTUM Sudation



Fig. 274

Suspensoir en caoutchouc pur pour la sudation du scrotum dans les cas d'eczéma.
Pour enfants. 4 » | Pour adultes. 6 »
Pour mesures, voir page 29. Grandes tailles de 8 à 20 fr.

HERNIÉS IRRÉDUCTIBLES ET HYDROCELES



Fig. 106.

Suspensoirs pour hernies irréductibles, poche tissu peau de diable, ceinture bordée chamois, depuis 25 francs.
(Pour renseignements complémentaires, voir page 19).

Étuis de propreté tout en caoutchouc pour préserver le linge des taches dans les affections vénériennes ou punaises locales, sans ceinture, pouvant s'adapter sur un suspensoir 1.50; avec ceinture 4 fr.

APPAREILS pour HÉMORROÏDES



Fig. 70.

Appareils pour hémorroïdes avec ceinture (fig. 70) 25 »
Appareils pour la chute du rectum avec ceinture. 55 »
Ces appareils rendent de très grands services aux personnes atteintes d'hémorroïdes et procurent un soulagement considérable en refoulant celles-ci à l'intérieur.
Mesures à fournir : circonférence à la taille.
Dire si la personne est petite, grande ou moyenne.
Peut-on entrer facilement un ou deux doigts dans l'anus et à quelle profondeur pour obtenir un soulagement.

APPAREILS pour ANUS ILIAQUE, FISTULE, MÉAT HYPOGASTRIQUE

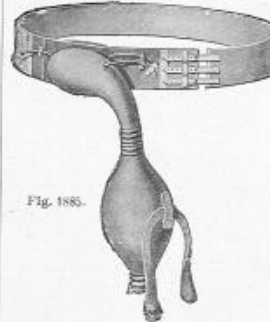


Fig. 1885.

Appareil pour anus contre nature, avec ceinture élastique (fig. 1885). 60 »

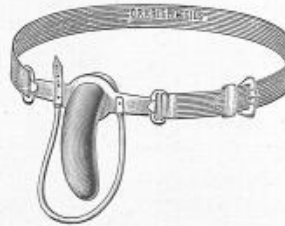


Fig. 275.

Appareil du D. A. Reverdin (fig. 275), avec ceinture élastique. 45 »
Poches de rechange, la pièce. 9 »
Appareil du D. A. Reverdin, monté sur ressort de bandage Camper 60 »

Mesures à fournir : Donner la circonférence du corps prise à l'endroit où existe l'ouverture, indiquer la côté, donner la longueur et largeur exacte de l'ouverture, nous dire si l'ouverture est droite ou oblique et dans quel sens.



Fig. 270.

Appareil pour fistule rénale ou pour fistule biliaire, ou pour méat hypogastrique.
Suivant l'usage auquel ils sont destinés, ces appareils varient légèrement de forme.
Appareil avec coquille en caoutchouc recouverte caout. (fig. 276) et ressort Dolbeau. 60 »
Le même avec coquille métallique recouverte caoutchouc sans ressort Dolbeau. 50 »
Le même sans coquille métallique, tout caoutchouc. 45 »

URINAUX

URINAUX A MAIN



Fig. 277.

Bassin fliche en porcelaine (fig. 277)
Petit modèle se glissant facilement sous les malades pour uriner. 6 »



Fig. 68

Urinal à main en verre, pour homme

— en porcelaine, pour homme	8 »	— Pour femme	4 »
— en caoutchouc (fig. 278), pour homme	2.50 »	— Pour femme	7 »
— en caoutchouc (fig. 68), pour femme, modèle déposé	10 »	— Pour femme	8.50 »
— en émail, pour homme	7 »	— Pour femme	12.50 »
— en verre, pour homme, modèle spécial pour recueillir les dépôts de gravier	12.50 »		



Fig. 60



Fig. 278.

Bouteille en caoutchouc (fig. 65) avec large goulot et bouchon souple comme un gant, recouverte d'une chemisette, pour mettre dans la poche ou sous l'oreiller. 12 »
Non couverte de toile 10 »
Bouteille forme spéciale pour dames 12 »
Bouteilles ordinaires, sans bouchon de 6 à 8 »



Fig. 62

Urinal spécial pour les Ecclésiastiques ne dépassant pas la jarretière

Excellent par sa forme et sa souplesse, il est appelé à rendre de grands services aux prêtres qui ne peuvent abandonner l'anneau ou le confessional. 25 »

MESURES

Joindre à toutes les demandes d'urinaux la circonférence du corps prise sur les hanches, la hauteur approximative de la personne, le volume des parties (moyennes ou grosses), la longueur de l'entre-jambe au sol.

Pour l'urinal (fig. 64), ajouter la circonférence des parties prise sans serrer à l'endroit où elles s'attachent au corps.

NETTOYAGE. — Les appareils en caoutchouc se nettoient à l'eau tiède avec une légère addition de vinaigre.
Tous les corps gras décomposent le caoutchouc.

TOILES CAOUTCHOUTÉES

Pour préserver la literie des malades, des vieillards, des nouveau-nés et pour les accouchements.

Toile caoutchoutée	Métrage à volonté
à 1 face, qualité supérieure, de 0m50 de large	le mètre 6 »
à 2 — — ordinaire, 1m20 —	8 »
à 2 — — supérieure, 1m10 —	11 »

Nous recommandons spécialement notre qualité supérieure; recouverte en caoutchouc pur, elle est d'une longue durée et n'a aucun rapport avec les articles vendus partout dans le commerce.



Fig. 60

URINAUX PORTATIFS POUR HOMMES

Pour le Jour

Urinal de jour modèle Drapier et Fils (fig. 60) en caoutchouc pur, recouvert d'une chemisette en tissu peau de diable. 25 »
Urinal de jour tout en caoutchouc (fig. 61) avec petite poche suspensoir. 15 »
— moyenne — 18 »
— grande — 20 »
Urinal ordinaire tout en caoutchouc sans poche suspensoir. 12 »



Fig. 61

En raison des variations constantes du caoutchouc, nous nous réservons le droit de majorer les prix des appareils sans autre avis.



Fig. 63

Cet appareil, qui est le dernier modèle créé, donne les meilleurs résultats partout où, par suite de la conformation ou de la diminution des parties génitales, l'emploi des urinaux ordinaires a échoué. 30 »
Le même pour enfants 25 »

URINAUX PORTATIFS POUR HOMMES


Pour la Nuit

Urinal de nuit pour hommes, en caoutchouc fort (fig. 63) 25 »
Cet appareil ne peut être employé utilement que chez des hommes encore jeunes.
Le même modèle se fait pour enfants et cadets, à 12, 15 et 20 »
Urinal de nuit spécial pour vieillards (fig. 64).



Fig. 64

LOCATION DE LITS MÉCANIQUES, Envoi franco sur demande du Catalogue spécial.

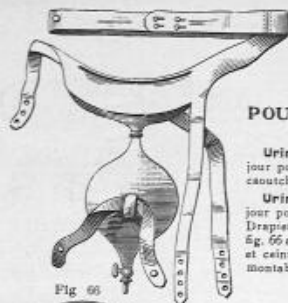

POUR LE JOUR

Urinal portatif de jour pour dames, tout en caoutchouc . . . 20 »
 Urinal portatif de jour pour dames, modèle Drapier et Filla, genre Fig. 65 avec tête à coulisse et ceinture élastique démontable. . . 25 »

Fig. 65

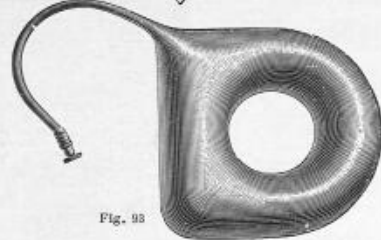


Fig. 98

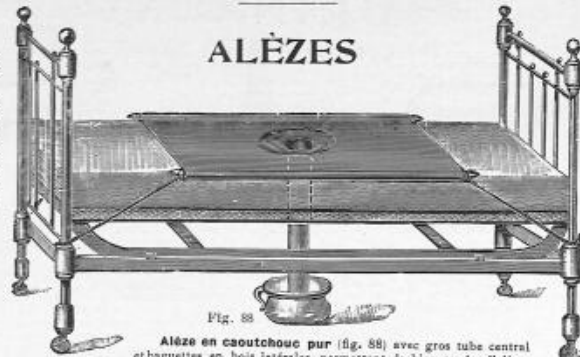


Fig. 88

ALÈZE EN CAOUTCHOUC PUR (fig. 88) avec gros tube central et baguettes en bois latérales, permettant de bien tendre l'alèze.
 En caoutchouc pur . . . pour enfants 70 x 80 . . . 38 »
 . . . pour adultes 100 x 100 . . . 50 »
 En toile caoutchoutée . . . pour enfants 75 x 100 . . . 34 »
 . . . pour adultes 100 x 100 . . . 35 »
 Le coussin (fig. 65, page 33) rend également de grands services aux personnes alitées.

COUSSINS EN CAOUTCHOUC

COUSSINS CAOUTCHOUC MOULÉ

Mélange de 1^{re} qualité
 (Les coussins en caoutchouc moulé ne peuvent être réparés.)

Diamètres . .	30	35	40	45	50
Rond et fer à cheval (fig. 71 et 97)	13	15	20	25	30
1/2 rond et carré (fig. 93 et 93)	15	17	22	27	32
Avec fond pour les coussins de 30, 35 et 40, supplém.	4	5	6		
— — — — — 40, 45				5	
— — — — — 50					6

Nota. — En raison des variations constantes du caoutchouc, nous nous réservons le droit de majorer les prix des appareils sans autre avis.



Fig. 101

COUSSINS pour excoriation du talon (fig. 101), de 10 c/m de diamètre . . . 4 »
 Le même de 12 c/m . . . 5 »
 — de 14 c/m . . . 6 »
 — de 16 c/m . . . 7 »

COUSSINS CAOUTCHOUC PUR

Diamètres . .	30	35	40	45	50
Rond et fer à cheval (fig. 71 et 97)	15	20	25	30	40
1/2 rond et carré (fig. 93 et 93)	18	23	28	33	43

Avec fond pour les coussins de 30, 35 et 40, supplém. 6 »
 — — — — — 40, 45 — 8 »
 — — — — — 50 — 10 »

COUSSINS-Oreillers pour le voyage, se gonflant à volonté, en caoutchouc soie, de 35 x 40. . . 16 » | 35 x 50. . . 18 »

Banquettes pour voitures, automobiles, etc., en caoutchouc recouvert de drap vert, bleu ou marron 40 x 35 25 » ; 40 x 45 40 »

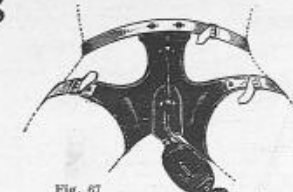


Fig. 67

POUR LA NUIT

Urinal portatif de nuit pour dames (fig. 67). Ce modèle constitue un appareil d'une application sûre à la fois pour le jour et la nuit. 40 »

MESURES POUR DAMES

Donner la circonférence du corps prise sur les hanches, la hauteur approximative de la personne.
NETTOYAGE. — Les appareils en caoutchouc se nettoient à l'eau tiède avec une légère addition de vinaigre.
 Tous les corps gras décomposent le caoutchouc.



Fig. 71



Fig. 97

LOCATION DE LITS MÉCANIQUES (Envoi du Catalogue spécial sur demande).

MATELAS

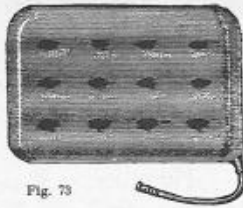


Fig. 73

Matelas en caoutchouc (fig. 73) se gonflent à l'air ou à l'eau.

95x35	35x60	40x60
30 »	45 »	60 »
50x70	60x80	70x90
80 »	105 »	140 »
80x105	85x120	
180 »	225 »	

Coussin-Bidet (fig. 69) en caoutchouc pur avec fond et tube d'écoulement que l'on place à travers un matelas.
Son emploi est surtout indiqué pour les malades atteints de paralysie, car en outre des services qu'il rend comme urinal, il remplace le coussin ordinaire de caoutchouc et évite les escarres que produit forcément un long séjour au lit.
Prix 40 »

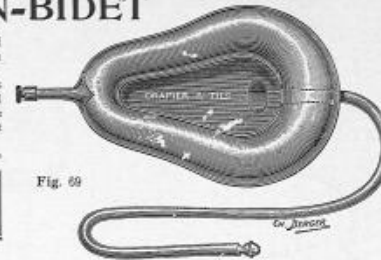


Fig. 69

En raison des variations constantes du caoutchouc, nous nous réservons le droit de majorer les prix des appareils en caoutchouc sans autre avis.

APPAREILS EN CAOUTCHOUC

POUR ECZÉMAS



Fig. 279

Bonnet en caoutchouc pur avec oreilles.
Enfants 3.50
Adultes (fig. 279) 5 »
Mesures. — Donner la tour de tête.



Fig. 280

Chaussons en caoutchouc pur (fig. 280) longueur jusqu'à 22 c/m., la paire 3.50
De 23 à 30 c/m., la paire 5.50
Chaussettes en caoutchouc pur. La paire 7 »
Mesures. — Donner la pointure du pied.



Fig. 281

Gants en caoutchouc pur avec pouce intérieur.
La paire 10 »
Mesures. — Donner la pointure du gant de ville.



Fig. 282

Masques en caoutchouc pur (fig. 282).
La pièce 10 »
Dire pour quel âge.

Suspendoirs en caoutchouc pur (voir fig. 274, page 30).
Bande en caoutchouc pur, largeur 6 c/m.
Le mètre 2.50

COUSSIN-BIDET

VENTOUSES — SCARIFICATEURS



Fig. 1796

Ventouses en verre, petites (p' enfants), moyennes (fig. 1796) 40 »
— — — grandes 50 »
— — — avec halle en caoutchouc 2.50
— en verre, avec robinet cuivre (fig. 110) 3.50
— — — tira-lait, en verre, avec robinet cuivre 4 »



Fig. 110

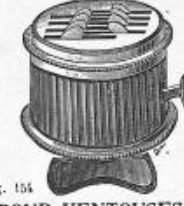


Fig. 154

BOITES POUR VENTOUSES
Boîte en bois façon noyer, à compartiments. 20 »
Comprenant :
6 ventouses en verre, petites 2.40
— — — moyennes 4.80
— — — grandes 3 »
1 lampe à alcool, cuivre 5 »
1 scarificateur nickelé, 8 lames 16 »
Total 51.90

Pompe aspirante p' ventouses à robinet 3 »
Tube intermédiaire p' pompe à ventouse 3 »
Lampes à alcool pour la pose des ventouses, en cuivre poli, qualité fine (recommandé). 5 »
Lampes à alcool pour la pose des ventouses, en cuivre nickelé 6 »
Scarificateurs nickelés (fig. 154), 6 lames 14 »
— — — 8 — 16 »
— — — 10 — 20 »

Boîte en noyer, pour ventouses à robinet (fig. 110). 15 »
Comprenant :
1 pompe aspirante 8 »
1 tube intermédiaire 3 »
3 ventouses à robinet 10.50
1 scarificateur 8 lames 16 »
Total 52.50

PESSAIRES

Pessaires pour antéversion

PESSAIRES à TUBE



Pessaire de Gariel (fig. 38), en caoutchouc souple, se gonfle à volonté 5 »
Insufflateur pour gonfler les pessaires de Gariel 5 »
Pessaire ovale dit en gimblette, en caoutchouc souple se gonfle à volonté (fig. 39) 5 »
 Le même, de forme ronde 5 »
Insufflateur pour gonfler les pessaires à tube 5 »



Fig. 40.

Pessaire en anneau flexible du docteur Dumontpallier (fig. 40), jusqu'à n° 8 3 »
 du n° 9 au 12 5 »
Pessaire en anneau flexible avec membrane (fig. 315) 5 »
Pessaire en caoutchouc gonflé à air fixe, forme ronde, 2 50



Fig. 316.

Pessaire de Hodge, malléable (fig. 316) 3 »
 Ce pessaire est composé d'une tige en étain recouverte de caoutchouc qui permet de modifier la forme à volonté suivant le cas.
Pessaire de Hodge en caoutchouc durci 3 »
Pessaire de Zwancq, en ébonite, dit pessaire papillon 7 »

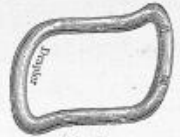


Fig. 51.

Pessaire de Sims, en aluminium (fig. 51), ce pessaire se fait de 7 tailles :

41	×	60	mm
43	×	65	—
45	×	70	—
47	×	75	—
49	×	80	—
51	×	85	—
53	×	90	—

Prix 5 »

MESURES : Indiquer le numéro de pessaire que l'on désire.

RÉTROVERSION



Fig. 317.

Pessaire avec anse, du Dr A. Burry. Le pessaire est composé d'un anneau flexible de Dumontpallier sur lequel se trouvent deux branches rigides dont la partie cernée est parallèle à la base et simple Prix 12 »
Pessaire à anse mobile, de Thomas, en caoutchouc durci 6 »



Fig. 318.

Pessaire ordinaire sans bulbe de Thomas, en caoutchouc durci 3 »
Pessaire en caoutchouc durci, à bulbe, de Thomas (fig. 318) 4 »
Pessaire de Hodge, malléable (v. fig. 316) 3 »

PROLAPSUS UTÉRIN

Ces modèles rendent de grands services lorsque le prolapsus est réductible, les branches en caoutchouc viennent se fixer en avant et en arrière sur une ceinture et assurent une bonne contention.

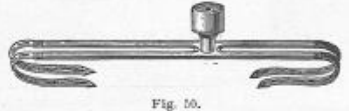


Fig. 50.

Pessaire releveur de Boegnet avec ceinture (fig. 50) 25 »
 Prix 25 »



Fig. 319.

Pessaire releveur en champignon avec ceinture (fig. 319) 25 »
Releveur avec ceinture pour déchirure du périnée, Prix 25 »

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

LAVEURS



Fig. 83

Douche d'Esmarck , de 3 litres, en tôle émaillée, avec 2 mètres de tube en caoutchouc moulé gris, robinet double olive en ébonite et canule demi-cristal fort.	7.50
Supplément pour tube feuille anglaise rouge ou noir, épaisseur moyenne.	8
extra fort.	6
Douche d'Esmarck , de 3 litres, monture caoutchouc gris moulé, avec robinet et canule.	9
La même contenant 4 litres.	12
— — — — —	15
— — — — —	18
— — — — —	25

Douche d'Esmarck , de 2 litres, en tôle émaillée, avec niveau d'eau extérieur (fig. 321), avec 2 mètres de tube en caoutchouc moulé gris, robinet double olive en ébonite et canule demi-cristal fort.	18
La même contenant 3 litres.	21
— — — — —	25
Avec thermomètre extérieur, en supplément.	6
Avec couverture	4



Douche emboutie
Fig. 320



Douche avec niveau d'eau
Fig. 321


CANULES

Douche d'Esmarck en tôle émaillée avec fond rond embouti, modèle facilitant le nettoyage, avec 2 mètres de tube en caoutchouc moulé gris, robinet double olive en ébonite et canule demi-cristal fort, 2 litres (fig. 320)	10
La même contenant 3 litres.	16
— — — — —	10
— — — — —	21
— — — — —	28
Supplément pour tube feuille anglaise rouge ou noir, épaisseur moyenne.	3
La même extra-forte.	5

Douche d'Esmarck en caoutchouc pur, pour le voyage, avec tube, presse-tube et canule, 1 litre.	14
— — — — —	19
La même avec couverture (fig. 84), 1 litre.	18
— — — — —	20
Douche d'Esmarck avec armature, métal nickelé et cloche verre.	12
— — — — — avec monture complète, 2 litres.	14
— — — — —	16
Vide-bouteille	12
Broc de Pinard , tout en verre gradué.	14



Fig. 84

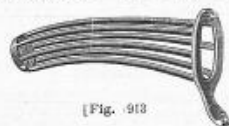

[Fig. 913



Fig. 82

Énéma tout en caoutchouc, pour voyage (fig. 82). 7
— — — — — avec canule à injections et lavements. 8



Fig. 79

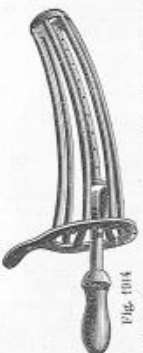


Fig. 322

Canules vaginales en caoutchouc rouge avec trous latéraux et au bout.	2
La même avec trous latéraux seulement.	3
Canule vaginale en caoutchouc, avec 16 trous (fig. 324).	4



Fig. 323

Canule vaginale en demi-cristal renforcé, avec trous latéraux et au bout.	0.75
La même sans trou au bout (fig. 325).	0.75
Les mêmes courbes.	1



Fig. 324



Fig. 325

Canule vaginale en demi-cristal renforcé avec un trou unique très large au bout (fig. 325).	0.75
Canule vaginale forme asperge (fig. 322), en demi-cristal renforcé.	1.25
Spéculum grillagé en métal, de Siredey, (fig. 1913)	7.50
Spéculum en ébonite, pour bains (fig. 79)	4

CANULES-SPÉCULUMS et SPÉCULUMS

Canule-spéculum (fig. 326), en métal nickelé pour injections et bains.	6
Canule-spéculum de Siredey (fig. 1914), en métal nickelé.	10
Spéculum grillagé en métal nickelé, pour bains (fig. 1913).	6

Pour les spéculum pour examens, voir notre Catalogue d'Instruments de Chirurgie. Envoi sur demande.

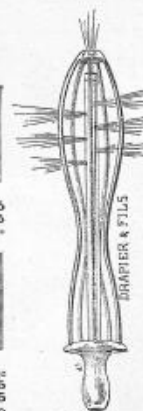


Fig. 326

CANULES pour IRRIGATIONS à 45° et 50°

Canules pour irrigations vaginales

Canules pour irrigations rectales



Fig. 1889.

Canule rectale du P^r Albarran (fig. 1889), à double courant, p^r irrigations chaudes. 15 »
Laveur à irrigations vaginales continues du D^r Dalché (fig. 338). — Le laveur sans le bock 15 »
 Ce modèle est constitué par un pessaire à membrana genre Dumontpallier percé de 2 trous, un donnant accès au liquide du bock, le second communiquant avec le tube évacuateur.
Indiquer le numéro de pessaire Dumontpallier que l'on désire.

CANULES

Canules uréthrales en 1/2 cristal, de Janet 60
 — avec protecteur, de Tuffier 1 »

BASSINS pour dans la position



Fig. 85.

Bassin émaillé, forme haute, sans tubulure 16 »
Le même (fig. 85) avec tubulures latérales et caoutchouc 18 »

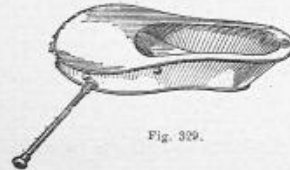


Fig. 329.

Bassin anglais, en émail, pour lavages; grand modèle avec tube d'écoulement émaillé, se vissant sur le bassin. 40 »
 (fig. 329)



Fig. 328.



Fig. 80.



Fig. 327.

Canule vaginale à double courant, avec cône isolant en caoutchouc et canules verre pour irrigations à 45° et 50° (fig. 80) 10 »
Canule vaginale à double courant (fig. 327), avec cône isolant en porcelaine et canule caoutchouc 6 50
Canule vaginale à double courant avec cône isolant en métal nickelé 12 »

URÉTHRALES

Canules uréthrales à double courant, de Suarez de Mendoza 1 50
 — de Pozzi 60

INJECTIONS étendue



Fig. 330.

Bassin en émail, embouti (fig. 330), sans tube d'écoulement. 12 »
Le même avec tube d'écoulement et caoutchouc 14 »

Siège pour injections prises en position couchée.

Ce modèle est articulé et peut se plier et se transporter aisément, le dossier est à élévation graduelle; l'ensemble est d'une grande stabilité.

Avec ferrures pointes = 60 »
 — nickelées = 70 »
 Laqué blanc et ferrures nickelées = 80 »

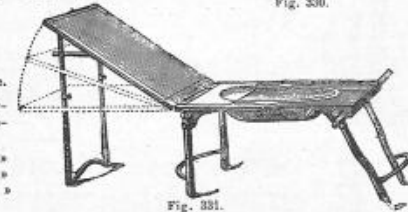


Fig. 381.



Fig. 73

IRRIGATEURS du D^r ÉGUISIER

DÉSIGNATION DES GRANDEURS	CUIVRE ÉTAMÉ			ÉTAIN (Recommandé)			POLI en MARBRÉ	NICKEL	PORCE-LAINE
	1 ^{re} qualité	2 ^e qualité	3 ^e qualité	1 ^{re} qualité	2 ^e qualité	3 ^e qualité			
N° 1 (3/4 de lavement)	14			18	15		20	25	
N° 2 (1/2 litre, lavement entier)	18	16	10	20	16	12	25	30	32
N° 3 (1 litre, double lavement)	22			25	20	16	32	40	40
N° 4 (2 litres)	60						75		
Bessots pour enfants et pour voyage	16						18	20	
1 litre à jet double force	35						45		

Les irrigateurs sont fournis avec leur tube et canule.



Boîtes pour irrigateurs, n° 2 en bois blanc.	1	»	Poires pour lavements, en caoutchouc (glaçé de première qualité, avec canule à lavement en os (Fig. 332) :								
En bois verni.	2	»		N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5	N° 8	N° 10	
En bois verni avec tourlets, fermant à clé.	5	»	Contenance en gr.	30	50	75	110	130	185	210	270
Boîtes pour irrigateurs, n° 3, en bois blanc.	1	»	Prix.	2.50	3	3.50	4	4.50	5	6	7
En bois verni.	4	»									
En bois verni avec tourlets, fermant à clé.	6	»									

CANULES POUR ENTÉROCLYSE



Les Canules Drapier et Fils sont graduées par 5 centimètres. La disposition de leurs yeux, un à l'orifice terminal et l'autre latéral et récurrent permet toujours l'écoulement du liquide.

Tout en caoutchouc pur. Ces canules sont livrées en boîte avec une instruction pour le mode d'emploi.

Exiger la marque : DRAPIER & FILS (Fig. 76).

Canules à pénétration ordinaire, Type A, longueur 35 centimètres.	3.50	»	Canules rectales pour irrigations chaudes (voir page 36).	
Canules à pénétration profonde, Type B, longueur 60 centimètres.	5	»	Porte-pommade rectal en ébonite.	9
Sondes Nélaton avec godet en caoutchouc, du n° 25 à 30. La pièce.	2	»	Dilatateurs rectaux en caoutchouc, du n° 0 au n° 11.	5
Sondes rectales à double courant, en caoutchouc.	7.50	»	Dilatateurs rectaux en métal (voir mandrins de Hégar sur notre catalogue d'instruments de chirurgie).	
			Ampoule en verre du docteur Bourget (de Lausanne), pour lavements huileux.	2.50

SPERMATORRHÉE

Appareil à griffes de Nark pour la spermatorrhée.	8	»	Canule rectale du docteur Albarran, à double courant, pour les irrigations chaudes (voir fig. 1889, page 36).	15
Compresseur prostatique de Trousseau, contre les pertes séminales.	15	»		

Appareils en Crin pur pour frictions sèches ou humides

Gants tout crin, tricot simple.	3	»	Lanières brosses sur angle, petite taille.	7
Gants tout crin, tricot double (fig. 90).	3.50	»	— — — — — moyenne (fig. 91).	8
— — — — — cambridge.	3	» et	— — — — — grande.	12
Gants brosses sur toile.	4	»	Lanières en crin tricoté.	8
— — — — — moule de laine (fig. 89).	5	»	— — — — — simple 6 » et double	10
			— — — — — cambridge	



Fig. 90

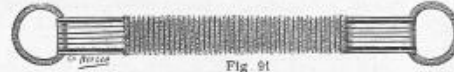


Fig. 91



Fig. 89



Fig. 74

SACS A EAU CHAUDE ou COMPRESSES ÉLECTRIQUES

Sacs à eau chaude ou Bouillottes en caoutchouc pur, sans anse	23x16	26x17	28x19	29x22	30x24
Prix.	7	9	11	13	15
avec anse (fig. 74)	9.50	11.50	13.50	15.50	17.50
Avec housse en flanelle, en plus.	3	3			

Bouillottes en métal, formé ovale pour l'abdomen.					
ÉTAMÉE		CUIVRE		NICKELÉE	
Petit modèle.	= 3.25	Petit modèle.	= 6	Petit modèle.	= 7.50
Grand modèle.	= 3.75	Grand modèle.	= 7.50	Grand modèle.	= 9

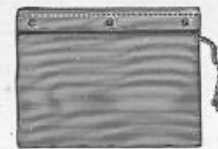


Fig. 331

Compresse électrique marchant sur courant continu ou alternatif 110 volts (fig. 331) de 34x26. Prix. 25 »
 Cette compresse se monte sur toutes les douilles de lampes électriques; elle est recouverte d'un molleton enfermé dans une toile caoutchoutée. Ce modèle est léger, souple et conserve de plus une chaleur constante de 45°.
 Appareils pour douches locales d'air chaud, voir fig. 363, page 43.

APPAREILS RÉFRIGÉRANTS



Fig. 334

Bonnet tubulaire réfrigérant en spirale (fig. 334), à double courant.

Enfants.	36
Adultes.	40

Bonnet à glace en caoutchouc pur, simple courant.

Enfants.	10
Adultes.	12

Bonnet à glace en caoutchouc pur, avec tube de sortie dit à double courant.

Enfants.	12
Adultes.	14



Fig. 335

Vessies à glace ovales en feuille anglaise pure, avec large bouchon central à vis en aluminium (fig. 335).

	18x23	21x27
	6	7
	25x30	30x35
	8	9

Vessies à glace rondes sans bouchon.

Diam. 21 c/m	4
— 26 c/m	5
— 31 c/m	6



Fig. 336

Vessies réfrigérantes rondes, avec tubes en spirale pour l'abdomen, formant courant continu (fig. 336).

16 c/m	21 c/m	27 c/m
18	24	36

Vessies réfrigérantes capitonnées, forme matelas avec courant continu.

16x19	21x25	27x32
18	22	30



Fig. 337

Vessies à glace pour les yeux.

Un oeil	3
2 yeux (fig. 337)	5
Vessies à glace pour le cou	6
Vessie à glace pour le dos, avec ceinture et bretelles	22



Fig. 338

Vessie à glace pour les oreilles (fig. 338).

Prix	3
------	---

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

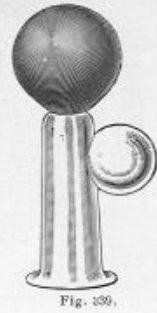


Fig. 339.



Bout de sein en caoutchouc (fig. 340).
 La pièce 1
 Le même en gomme noire 1.50
Garde-lait 1/2 cristal, la paire 1.50
Garde-lait en ébène 5
Tire-lait en verre simple (fig. 341).
 La pièce 1.25
 Le même, avec tube de caoutch. 1.50
Tire-lait anglais (fig. 342).
 La pièce 2.50
Ventouse tire-lait (fig. 339) avec réservoir la pièce 5
Ventouse tire-lait à pompe 15
Ventouses de Bier (voir catalogue Instruments de Chirurgie).



Fig. 343.

ALLAITEMENT

Biberon modéle avec tétine à soupape
DRAPIER & FILS Prix. 1.50

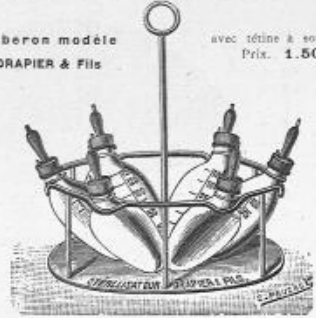


Fig. 344.

STÉRILISATEUR DRAPIER ET FILS
 6 flacons (fig. 343) 10
 Avec marmite émaillée 14.50
 Modèle 10 flacons 20
 Avec marmite 30.50



Fig. 506.

STÉRILISATEUR du Prof. BUDIN
 6 flacons avec marmite fer blanc 12
 Avec marmite émaillée 14

Serre-Oreilles pour Bébés
 (Fig. 506)
 Indispensable chez les jeunes enfants dont les oreilles s'écartent de la tête d'une façon diagra-cieuse. Prix : 4 fr.
 Donner l'âge de l'enfant et le tour de tête.

PÈSE-BÉBÉS

Feuille de pesées du Dr Quidet :
 1 feuille du premier mois la pièce = 25
 = 30
 1 feuille annuelle (36 semaines) 30
 15 = 40
Série de poids en fonte de 5 kgs 500 7 50
 en cuivre de 500 gr. 6 50

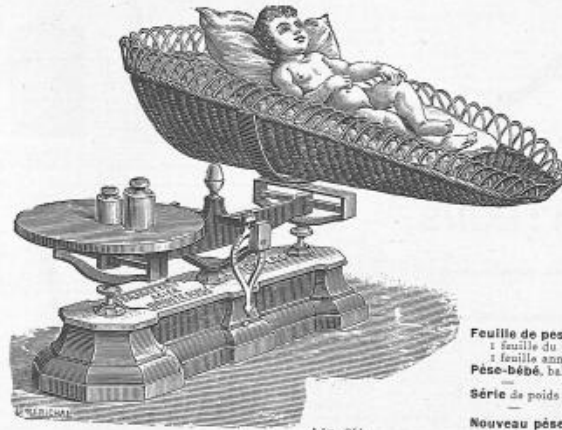


Fig. 344.

Nouveau pèse-bébé du Docteur Wallich, avec hamac, pesant jusqu'à 10 kgs; sensibilité à 5 grammes, pouvant s'accrocher au mur par 3 pitons, soit au pied du lit des accouchées dans une maternité = 72
Pèse-bébé de précision à cadran, modèle de poche, en étai chamais. = 65
Couveuses artificielles du Dr Tarnier, en glaces et armatures métalliques laquées blanc : 250 — En location, par mois : 40



Fig. 1963.

Tire-lait de Madame Henry, modéle des Hôpitaux 1.50
Téterelle bi-aspiratrice du Dr Auvard (fig. 1965) 3.50

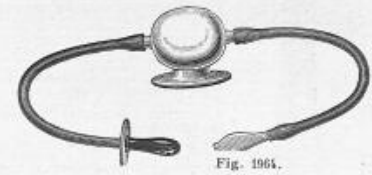


Fig. 1964.

Téterelle bi-aspiratrice du Dr Budin (fig. 1964) 3.50
Gaveuse en cristal du Dr Tarnier, avec sondes, pour nouveau-nés. 4

Hochet médicamenteux du Dr Liébault
 (Fig. 345.)

Ce hochet tout en caoutchouc permet de placer dans la tétine percée de trous multiples, qui se visse sur le hochet, des petits bâtons de guimauve tout préparés dans le but de faciliter la dentition, ou avec médicaments (safran, tamarin, phosphate de chaux, etc.) 3

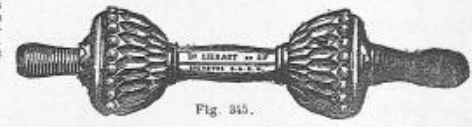


Fig. 345.

La boîte de bonbons x 75
Tétines de rechange = 50

CORNETS ACOUSTIQUES pour la SURDITÉ



1/3 GR.

Fig. 113

- Cornets acoustiques à rallonges en ébonite** (fig. 113), 1 rallonge 7 »
 | 2 rallonges 10 »
Les mêmes : | 3 rallonges 12 »
- Cornets acoustiques en métal noir verni** (fig. 158), 3 grandeurs : N° 6, 6 »
 N° 7 » N° 8, 9 » N° 2, 12 » N° 3 15 »
- Cornets acoustiques en métal noir oxydé :**
 Petit modèle 10 »
 Grand modèle 12 »
- Petit cornet acoustique en métal oxydé se dissimulant dans la main** 12 »
- Cornets acoustiques en métal noir oxydé à double puissance :** N° 1. 18 »
 N° 2 20 » | N° 3 26 »
- Conques microphones se dissimulant dans l'intérieur de l'oreille, en argent, intérieur rose** La paire 12 »
- Conques microphones** (fig. 191) se dissimulant dans l'intérieur de l'oreille, avec pavillon large; en argent avec intérieur rose La paire 50 »
- Conques vibrophones se dissimulant dans l'intérieur de l'oreille, métal doré, en ébonite** La paire 56 »



Fig. 192

- Éventail acoustique en satin** (fig. 192) 45 »
Le même acoustique recouvert satin noir sans adjonction de l'éventail en satin (modèle puissant) 20 »
Canne acoustique pour messieurs 58 »



Fig. 190

- Cornets acoustiques avec tube, à spirale intérieure, permettant la conversation à appartement sans fatigue** (fig. 160) 9 »
Le même, avec gros tube de 1 mètre de longueur 30 »



Fig. 191

La figure 190 représente la conque ci-dessus en position dans l'oreille.



Fig. 190

- Antiphones en métal nickelé, pour empêcher les sons de parvenir à l'oreille. La paire** 9 »



Fig. 118

1/3 GR.

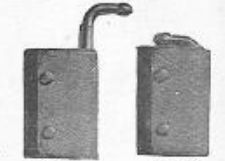


Fig. 346.

Fig. 347.

L'appareil ouvert. L'appareil fermé

- Sac à main acoustique recouvert de peau de pboque, Modèle imitant parfaitement le sac à main de dame** (fig. 346 et 347) 48 »
 Force moyenne 48 »
 Modèle double force 68 »

FUMIGATEURS —

- Bocalrhine du Dr Moura, en porcelaine** 8 »
Inhalateur de Nicolay, en émail, petite taille (fig. 1770) 10 »
Le même, grande taille (fig. 1770) 12 »
Fumigateur à vapeur 20 »
Brûleur Guasco, prchambres de malades 8 »
 — n° 4, pour ateliers et hôpitaux 30 »
Goudronnière pour évaporation de vapeurs de goudron 25 »

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

INHALATEURS — RESPIRATEURS



Fig. 348

- Aérotitre saturateur et ventilateur, modèle Drapier et Fils, pour la préservation et le traitement des maladies de poitrine** 60 »
Respirateur en celluloid pour le nez et la bouche, du Dr Mackensie, avec soupapes d'inspiration et d'expiration et filtre d'ouate 15 »
Respirateur pour le nez et la bouche 7 50 »
 — pour la bouche, en ébonite, avec ouate interchangeable 10 »
Respirateur pour la bouche, avec treillage argent 4 »
Respirateur ordinaire 2 » et 3 »
 40 »

PULVÉRISATEURS

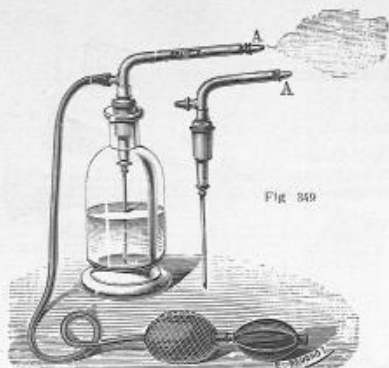


Fig. 349

Pulvérisateur Richardson, avec tige ébonite et soufflerie à double ballon. 5 »
Pulvérisateur Richardson, à bille, avec tige en métal nickelé, à jet réglable avec soufflerie à double ballon (fig. 349) 6 » et 7 »
Pulvérisateur Richardson, modèle soigné, avec tige auto-désobstruante et forte soufflerie. 18 »
Pulvérisateur Richardson, avec tige tout en verre, avec soufflerie à double ballon. 7.50



Fig. 1707

Pulvérisateur à vapeur, petit modèle, en métal blanc. 9 »
 — à vapeur (fig. 1707), en métal blanc. 12 »
Le même, en cuivre nickelé, modèle soigné (recommandé). 18 »
Pulvérisateur à vapeur, en cuivre nickelé, marchant une demi-heure. 20 »
Le même, avec robinet. 24 »
Pulvérisateur petit modèle Lucas-Championnière, avec chaudière renforcée et tige pulvérisante, à robinet, marchant 1 heure. 45 »
Le même, avec versoir à la lampe et à la chaudière. 55 »



Fig. 119

Pulvérisateur à vapeur, du D^r Gopin, modèle Drapier et Fils, (déposé), avec entonnoir à déversoir et cupule pour recueillir la vapeur condensée (fig. 119).
 Modèle courant. 22 »
 Grand modèle. 30 »



Fig. 1845

Pulvérisateur à vaseline (fig. 1845).
 Prix. 7 »
Pulvérisateur nasal tout en verre, du docteur Rouair. 8 »
Pulvérisateur nasal, sur longue tige métal droite, olive ébonite. 7.50
Seringue nasale de Marfan, pour l'huile de vaseline, verre et ébonite. 2.50
La même, métal nickelé et corps verre, en boîte métal. 14 »

LANCE-POUDRES — SIPHONS — POIRES DE POLITZER



Fig. 1832

Lance-poudre de Kabiersky, en métal nickelé, avec 2 canules (fig. 1832). 12 »



Fig. 350

Poire de Politzer, en caoutchouc verni rouge, première qualité, avec soupape (fig. 350). 9 »
La même, grande taille. 10 »
La même, en caoutchouc noir uni. 10 »
La même, à 3 tubulures. 12 »



Fig. 1838

Lance-poudre à bille, en ébonite, avec canule droite ou courbe (fig. 1838). 5 »



Fig. 351

Siphon de Weber, pour lavages du nez (fig. 351), avec bille démontable et olive porcelaine, en caoutchouc rouge. 6 »
Le même, en caoutchouc noir. 7.50

LAVAGES D'ESTOMAC

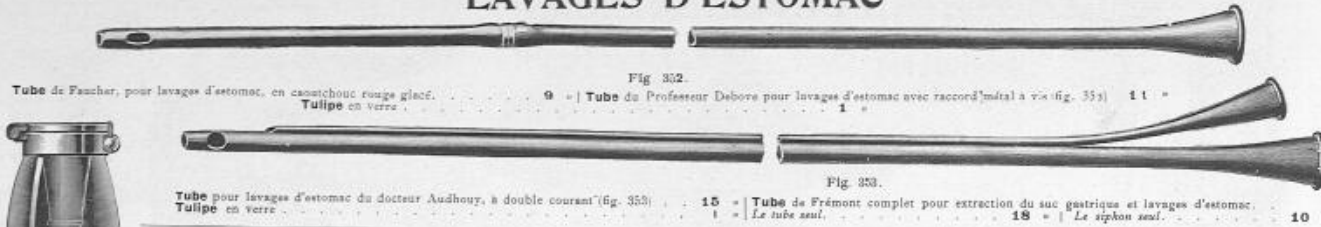



Fig. 302. Tube de Faucher, pour lavages d'estomac, en caoutchouc rouge glacé. Tulipe en verre. 9 = Tube du Professeur Debora pour lavages d'estomac avec raccord métall à vis (fig. 353) 11 = Tulipe en verre 1 =

Fig. 303. Tube pour lavages d'estomac du docteur Audhouy, à double courant (fig. 353) 15 = Tube de Frémont complet pour extraction du suc gastrique et lavages d'estomac. Le tube seul. 18 = Le siphon seul. 10 =

THERMOMÈTRES



Fig. 354. Thermomètre maxima aseptisable, modèle courant, en étai nickel ovale, long. 13 cm (fig. 357) 2 50
 Thermomètre maxima prismatique, tout en verre 5 =
 Thermomètre maxima à la minute, aseptisable, avec étranglement, contrôlé par l'État, avec certificat du Laboratoire des Arts et Métiers, en étai nickel 7 =
 Thermomètres de haute précision, de Pillischer 12 =
 Avec capsule de compression pour faire redescendre le mercure automatiquement 16 =
 Thermomètres de bains avec échelle en métal poli 1 50
 Thermomètres de bains dits "bateaux", flottant sur l'eau 3 =
 Feuilles de température, la pièce 0 10
 Feuilles de température du docteur Quidat, nouveau modèle, la pièce 0 15

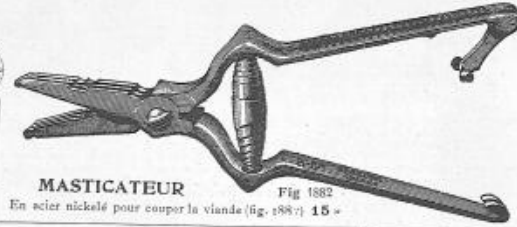

MASTICATEUR Fig. 1882
 En acier nickelé pour couper la viande (fig. 1882) 15 =

ALBUMINIMÈTRE

ANALYSE DU SUCRE - VERRERIE GRADUÉE

Albuminimètre d'Esbach sur pied bois (fig. 356) 3 =
 Le même, perfectionné 7 =
 Appareil complet pour analyse de sucre 30 =
 Tubes à essais pour analyses La pièce 0 25
 Pincés en bois pour tenir les tubes à essais 1 50
 Verrés gradués à pied (fig. 358), contenance 50 grammes 2 =
 — 60 — 2 50
 — 100 — 3 =
 — 125 — 3 50
 — 200 — 4 =
 — 250 — 4 50
 — 500 — 5 =
 — 1000 — 6 50



Fig. 357.

Bocaux gradués p^r urines (fig. 357) 3 litres 4 =
 3 litres 6 =
 4 litres 8 =
 Éprouvettes graduées à pied et à bec de 10 cc 2 =
 de 20 — 2 50
 de 30 — 3 =
 de 50 — 3 50
 de 100 — 4 75
 de 150 — 6 50
 de 200 — 7 25
 de 300 — 8 50



Fig. 358.

CRACHOIRS



Fig. 359. Fig. 409. Fig. 360.
 Crachoirs de poche (fig. 359), modèle du docteur Detweiler (2 grandeurs), en verre, 7 fr.; en aluminium 11 =
 Crachoirs de poche, en verre, couvercle nickelé 2 50
 Crachoirs en porcelaine, couvercle mobile (fig. 100) 2 =
 Crachoirs en émail, modèle des hôpitaux, avec couvercle mobile, avec couvercle percé (fig. 359) ou couvercle plein (fig. 360), diamètres :
 80 mm 2 50
 90 mm 2 75
 100 mm 3 =
 Crachoir à ouverture et fermeture automatique Le Sanitor, couvercle en verre avec recouvrement métallique 8 =

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

HYDROTHERAPIE

AUTO-DOUCHEUR
à déclanchement automatique
MODÈLE DRAPIER & FILS
Breveté S. G. D. G.

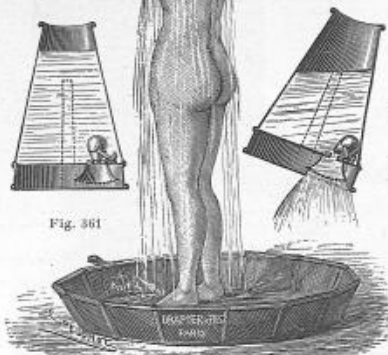


Fig. 361

Verni (fig. 361) . . . Prix. 46 »
Nickelé — 35 »

Collier-douche n° 1,
se montant sur un
robinet de cuisine. Prix. 8 »

Collier-douche n° 2,
se montant sur un
réservoir en zinc
verni d'une conte-
nance de 18 litres. — 20 »

Nota. — Appareils en crin pour frictions
voir page 37.

TUBS



Fig. 362.

Tubs en zinc, fond embouti, qualité forte.
Diamètre, 70 cent. Prix. 25 »
Le même, 90 cent. — 30 »
Tubs en toile caoutchoutée pliants pour le
voyage, qualité renforcée :
70 cent. de fond Prix. 30 »
80 — — — — — — 35 »
90 — — — — — — 40 »

AIR CHAUD



Fig. 363.

Appareil pour douches
locales d'air chaud ou
d'air froid, fonctionnant
sur secteur électrique
110 volts alternatif ou
continu indistinctement.
Il se branche sur toutes
les douilles de lampes
électriques. . . 150 »

THERMO-BAIN

à chauffage extérieur permettant de se vêtir à l'intérieur après le bain, ce qui évite les refroidissements.



Fig. 364. L'Appareil pendant le bain.

L'appareil « THERMO-
BAIN » permet de pren-
dre les bains d'air chaud
ou bain turc, les bains
de vapeur médicamen-
teux ou non, des fumiga-
tions sèches ou humides.

On peut donc prendre
confortablement son bain
chez soi, par conséquent
sans risques de refroidis-
sement en sortant de
l'établissement de bain
et à l'heure qui convient
le mieux.



Fig. 365. L'Appareil plié.

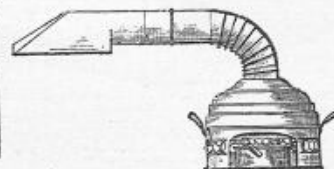


Fig. 366. Ensemble du Générateur.

Le THERMO-BAIN est
d'un emploi facile et sûr.
Une fois plié et rangé
dans son enveloppe en
papier parcheminé, il n'a
plus qu'une épaisseur de
5 à 6 cent. Il n'est donc
pas encombrant. Une no-
tice détaillée pour son
emploi accompagne cha-
que Thermo-Bain.
Appareil Thermo-Bain
en tissu simple. =70 »
En tissu double (recom-
mandé pour la solidité).
Prix : =100 »



Fig. 367. L'Appareil après le bain.

APPAREILS ÉLECTRIQUES



Fig. 1732.

Appareil d'induction voltafaradique, modèle transportable (fig. 1732), avec pile en porcelaine, fonctionnant au bichromate de potasse, avec les accessoires.
 Petit modèle . . . 35 »
 Moyen modèle 45 »
 Grand modèle. 55 »

POUR MALADES



Fig. 1733.

Appareil d'induction à pile sèche, à mise en marche instantanée même genre et prix que fig. 1732).
Appareil d'induction voltafaradique, au bisulfate de mercure (fig. 1733), avec les accessoires.
 Petit modèle . . . 30 »
 Moyen modèle . . . 40 »
 Grand modèle. . . 55 »

Appareil à courant continu, modèle simplifié, avec galvanoscope et accessoires: une case contient les bocaux vides pour égoutter les éléments et une autre case les bocaux pleins pour la mise en marche.

Nombre d'éléments.	6	10	15	20	25
Prix.	30 »	40 »	50 »	60 »	70 »

Appareil à courant continu (fig. 308), avec collecteur, interrupteur, galvanoscope et accessoires.

Nombre d'éléments.	8	12	18	24
Prix.	40 »	55 »	75 »	100 »



Fig. 308.

APPAREILS DE MASSAGE

MASSAGE DE L'ABDOMEN ET DE L'ESTOMAC

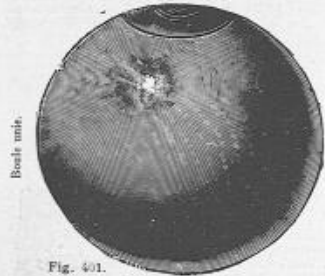


Fig. 401.



Fig. 402. — Boule unie avec poignée mobile.

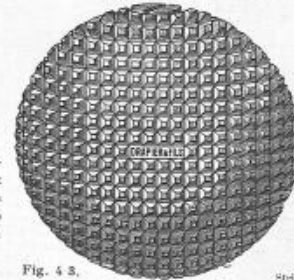


Fig. 403.

NOTA

Les prix ci-dessous s'entendent pour les boules vides; la charge de plomb en plus.

Boules creuses en bois (Fig. 401).
 Les boules sans manches sont d'un emploi plus aisé lorsque le malade se masse lui-même.

Boules creuses en bois (Fig. 402) avec poignée mobile en tous sens.

Grenaille de plomb servant au remplissage des boules. (Pour remplir les boules de grenaille de plomb, dévisser avec le tournevis en bois joint à l'appareil la partie de la boule où est pratiquée une encoche) le kilo.

Diamètre	pois de la boule	pois du plomb	Unies	Strées
0 ^m 09;	0 ^k 175;	1 ^k 500	5 »	8 50
0 ^m 10 1/2;	0 ^k 225;	2 ^k 500	7 »	8 50
0 ^m 12;	0 ^k 270;	3 ^k 370	9 »	11 »
0 ^m 09;	0 ^k 300;	1 ^k 500	8 »	9 50
0 ^m 10 1/2;	0 ^k 350;	2 ^k 500	10 »	11 50
0 ^m 12;	0 ^k 370;	3 ^k 370	12 »	13 50
				1 25

Mode d'emploi. — Le massage de l'abdomen doit être pratiqué étouché en faisant rouler la boule sur la ventrue dans un mouvement giratoire de bas en haut et de droite à gauche en commençant par le flanc droit.

MASSAGE DU CORPS



Fig. 404.



Fig. 405

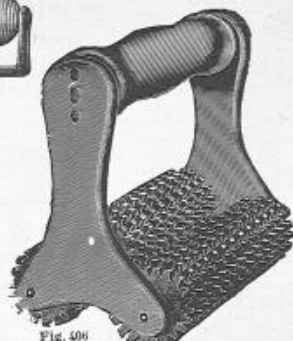


Fig. 406

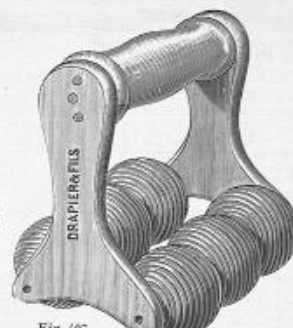


Fig. 407.

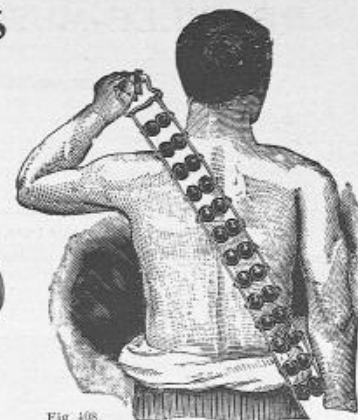


Fig. 408.

MASSEURS POUR LA NUQUE, LES ÉPAULES, LA POITRINE, LES BRAS ET LES JAMBES
 Rouleaux à une branche sur poignée (fig. 404 et 405)
 Rouleaux à branches parallèles (fig. 406 et 407)

6 »
 6 50
 7 »
 8 50

MASSEURS POUR LES REINS, LE DOS
 Lanières à boules unies (fig. 408)

Poignée métal à 24 boules 14
 Poignée bois à 36 boules (fig. 408) 18



MASSEURS p^r LE MASSAGE HYGIÉNIQUE GÉNÉRAL
 Petits masseurs à poignée et à boule dévissable
 Petit modèle à boule cannelée (fig. 409) 3 50
 à boule striée 4 50
 Grand modèle à boule cannelée 4 50
 à boule striée (fig. 410) 5 50

MASSEUR POUR PERSONNES SENSIBLES
 Rouleau-masseur à axe flexible du Docteur Barthélemy Breveté S. G. D. G. (fig. 411)



Fig. 412.

MASSEUR POUR LES DOIGTS
 Boule cannelée avec manche (fig. 413)
 Prix 3 50

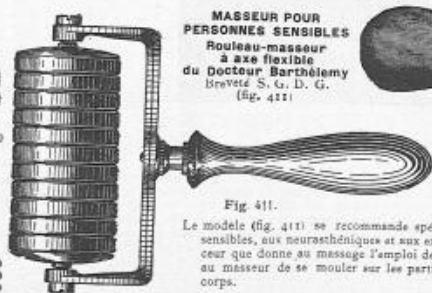


Fig. 411.

Le modèle (fig. 411) se recommande spécialement aux personnes sensibles, aux neurasthéniques et aux enfants, par l'extrême douceur que donne au massage l'emploi de l'axe flexible permettant au masseur de se mouler sur les parties les plus saillantes du corps.

Prix : 13 Francs.

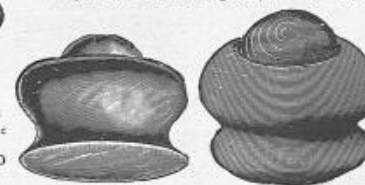


Fig. 413.

Fig. 414.

MASSEURS JAPONAIS POUR MASSAGE GÉNÉRAL
 Petits masseurs à boule non dévissable

Petit modèle, à boule cannelée (fig. 413) 2 »
 Grand modèle, à boule cannelée (fig. 414) 2 50

RÉVEILLE-MUSCLES ou FRAPPEURS



Fig. 451

Réveille-muscles ou frappeur (Fig. 451), avec manche bois, tige baleine et grosse boule caoutchouc. 9.50
 Masseurs en ivoire pour la figure (Envoi sur demande de la notice spéciale).

MASSAGE VIBRATOIRE

APPAREILS A MAIN

Appareil *Veedee* (Fig. 476), avec raccord n° 4, à calotte C et à boule H = 45 »
 Le même appareil en écrin gainerie, intérieur velours avec burette, bouteille d'huile, etc. = 56 »
 et
 15 raccords divers pour le massage des diverses parties du corps = 140 »

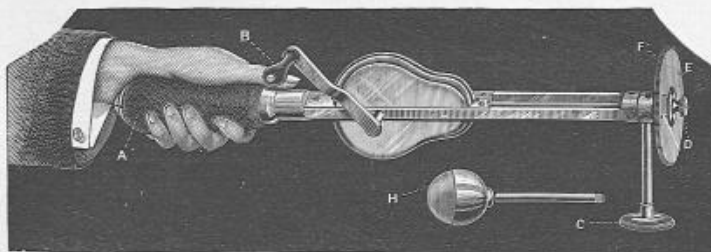


Fig. 471

L'appareil à main "*Veedee*" pour vibration mécanique est léger (environ 560 gr.) et de petit volume. Le pouvoir vibreur obtenu avec le "*Veedee*" est amplement suffisant pour le traitement de tous les cas où le massage mécanique peut être utile. L'appareil et les raccords n° 1 et 4 (qui sont toujours livrés avec le "*Veedee*"), sont en général suffisants pour l'application appropriée du traitement vibratoire.

En tournant la manivelle, on met en mouvement un volant ajustable qui évolue avec rapidité à l'extrémité de l'appareil. Un tour de manivelle correspond à 50 tours de volant. Les révolutions du volant transmettent les

vibrations à tout l'appareil qui à son tour les transmet au corps.

La force vibratoire peut être augmentée ou diminuée par l'opérateur, selon les nécessités du traitement.

Différents raccords ont été construits pour le traitement d'un grand nombre de cas spéciaux. Les accessoires se montent et se démontent avec la plus grande facilité. Pour le traitement de cas spéciaux, il est préférable de se servir des raccords particuliers à chaque cas, car chacun d'eux a une action qui lui est propre. Sur demande, nous envoyons la notice complète relative aux raccords divers spéciaux.

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

Rouleaux Masseurs Électriques à âme flexible

du Dr BARTHÉLEMY (Breveté S. G. D. G.)

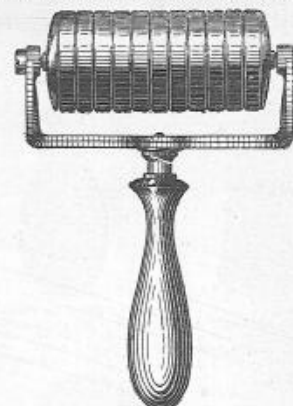


Fig. 411.

1° **Rouleau uni-polaire.** — Ce masseur se compose de disques en aluminium montés sur un axe flexible; il se moule sur toutes les parties même saillantes du corps, il est à la fois très doux et très puissant.

Prix du masseur uni-polaire seul 25 »


2° **Rouleau bi-polaire.** — Le rouleau bi-polaire est semblable au précédent; il n'en diffère que par l'adjonction d'une plaque en ébonite centrale, permettant de fixer les deux pôles électriques sur le rouleau.

Prix du masseur bi-polaire seul 30 »

L'énergie électrique est fournie aux masseurs uni-polaires et bi-polaires du Dr Barthélemy par une pile électrique indépendante dont les fils se fixent sur les rouleaux (Voir appareils électriques, page 44).

APPAREILS de MASSAGE VIBRATOIRE — SISMOTHERAPIE

Fonctionnant sur Secteur électrique ou Accumulateurs

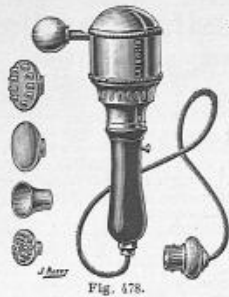

Petit masseur vibratoire électrique avec fil souple, se montant sur une douille de lampe électrique. Fonctionne indistinctement sur courant continu ou alternatif, 110 volts. Ce masseur est fourni avec 4 raccords, dont 2 en ébonite et 2 en caoutchouc. (Fig. 478). Prix : **130 francs**. Avec étrin galvanic, supplément . **10 »**



Fig. 454



Fig. 455

ACCESSOIRES POUVANT SE VISSER SUR LA TÊTE DU TRÉMOLO :
 Anneau pneumatique de 115 % pour la tête, le dos, l'abdomen et l'estomac (fig. 454) **10 »**
 Plateau ébonite à la cardan de 70 % pour le cou (fig. 455) **12 »**
 Pour le larynx, ébonite (fig. 453) **7 50**
 Double roue rotatif à galets ébonite caoutchouté (fig. 453) pour le dos, l'abdomen, les bras, les jambes.

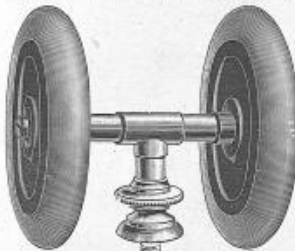


Fig. 453

Petit modèle, 40 % **12 »**
 Grand modèle, 68 % **18 »**
Frontal pour le front, les joues, le cou, le menton et le traitement des varicèzes (fig. 454). **10 »**
Excitateurs ronds et ovales, tête gutta (fig. 455), diamètres 2 c. 5/4, 4 cent. **7 »**
 6 et 7 cent. **8 »**
 Les mêmes avec boule ronde en caoutchouc **8 »**
Excitateur pour la prostate. **12 »**
 Prix **12 »**

Nota. — Avoir soin de nous indiquer sur quel voltage l'appareil doit marcher, et le nombre de périodes lorsque l'on emploie du courant alternatif.

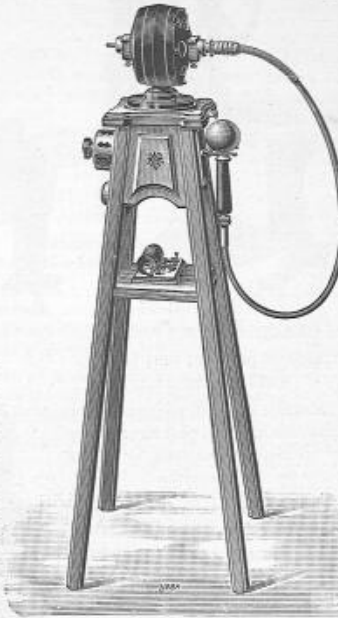


Fig. 457

L'Appareil trémolo pour massage vibratoire (fig. 457) à puissance et effets réglables, breveté, pouvant servir à toutes les applications de la massothérapie, y compris le massage des parties circonscrites du corps ou de parties très délicates, réglable de 0 à l'effet maximum pendant le travail et sans changer la vitesse de rotation du système.

Moteur avec rhéostat sur tabouret élégant en acajou, fonctionnant sur secteur de ville à courant continu, arbre flexible démontable, section renforcée (fig. 457) **400 »**
 Le même sur courant alternatif **425 »**

Appareil genre fig. 457 fonctionnant sur secteur de ville à courant continu avec tabouret ordinaire en noyer ciré, flexible, démontable, non renforcé, moteur rond plus petit que celui de la fig. 457, avec trémolo non réglable comme amplitude rhéostat de réglage de vitesse **350 »**
 Le même, sur courant alternatif **375 »**

Supplément pour appareil faradique en vue du massage vibratoire-faradique **85 »**

Appareils concusseurs à rouleau, à lanières, etc., depuis **6 50**

Manche spécial pour mise en marche des appareils concusseurs **50**



Fig. 451



Fig. 452

Sur l'appareil (fig. 457), en supprimant le flexible et le trémolo, on peut adapter une pompe pour le massage vibro-pneumatique de la peau et pour les différentes applications de l'air comprimé et du vide en thérapeutique, avec excitateurs pour le visage, les seins, le pénis etc. Cet appareil constitue une des nouveautés des plus intéressantes dans la massothérapie.

Prix de la **Pompe** avec ses accessoires **160 »**

11. Dans les cas où il n'existe pas de distribution d'électricité :
Appareil trémolo complet, avec moteur de 12 à 24 volts, courant continu sur tabouret, noyer ou acajou verni, flexible démontable, arbre de l'arbre section **340 »**

Deux Batteries d'accumulateurs, dont une pouvant servir de réserve. **Éléments** d'une capacité de 15 ampères-heures par batterie. Les deux **280 »**

111. **Appareil transportable** pouvant servir aux mêmes applications que celui à poste fixe.

L'**Appareil** transportable complet, boîte chêne, avec moteur et batterie de 6 accumulateurs = **470 »**

Une **batterie** de rechange **145 »**



Fig. 450

MÉCANOTHÉRAPIE

Notre Maison est concessionnaire exclusive, pour la France, des appareils de Mécanothérapie KROOK et DRASLER.

Ces appareils sont universellement reconnus, depuis plusieurs années, comme tout à fait pratiques pour le traitement, par mouvements lents et progressifs, des articulations ankylosées. Ils furent créés en vue de tenir lieu économiquement des appareils suédois dont le prix est fort élevé. Grâce à ces appareils perfectionnés, la mécanothérapie rationnelle est devenue à la portée des plus petits établissements médicaux.

Une installation complète, telle qu'elle est choisie le plus souvent par les médecins se compose des appareils suivants :

Un Appareil à main (ou à moteur) pour les traitements par des mouvements passifs;

Un appareil à poids pendulaire réglable, pour les traitements par des mouvements actifs.

Un appareil à pendule pour les traitements délicats des doigts et de la main.

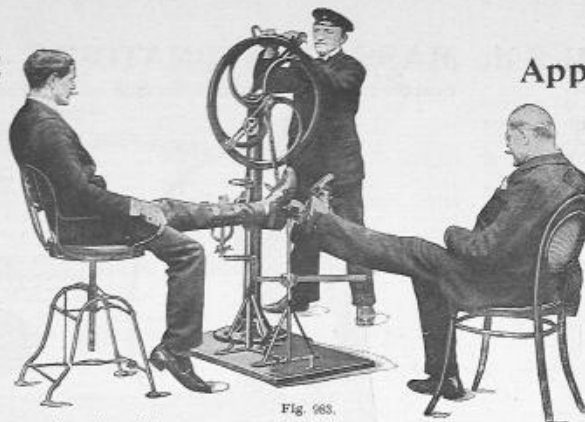


Fig. 983.

Appareil passif disposé avec éclisses pour la rotation du pied et la flexion du pied.

L'appareil passif nu sans éclisses.

Prix : * 450 francs.

Le même appareil, pourvu en plus d'une roue motrice, peut être actionné par un moteur électrique (n° 200 M) de 1/3 de cheval environ.

On règle l'amplitude du mouvement à réaliser, selon une échelle lisible de 1 à 90°, de sorte que le médecin et le malade lui-même suivent les progrès méthodiques de la rééducation qui s'opère.

ENVOI DU CATALOGUE DÉTAILLÉ SUR DEMANDE

Appareils Passifs & Actifs

pour le TRAITEMENT des ANKYLOSES

Le prix d'ensemble de ces appareils, éclisses et accessoires divers, ne dépasse pas 1.700 à 1.800 francs.

Nous possédons les listes de plus de 600 (six cents) installations de ce type, effectuées en Europe et en France, principalement dans les pays où les lois sur les accidents du travail ont atteint leur plein effet de développement.

L'un et l'autre permettant de réaliser, à l'aide d'un jeu d'éclisses appropriées, les exercices ci-après :

Rotation articulaire du poignet. — Flexion articulaire du poignet (abduction). — Flexion du coude. — Roulement articulaire de l'épaule. — Flexion du pied. — Rotation du pied. — Flexion de la cheville, du genou et de la hanche. — Flexion du genou. — Elevation de l'épaule. — Flexion de la main et des doigts. — Flexion du corps en avant et en arrière. — Flexion latérale du corps. — Flexion du corps (avant, arrière ou latérale).

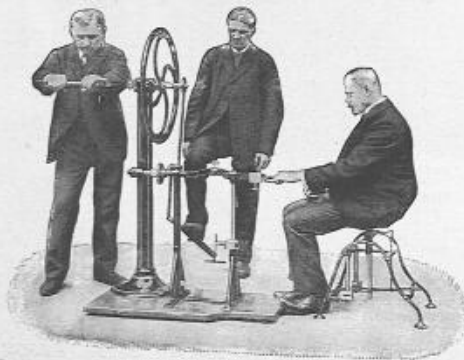


Fig. 984. — Appareil passif disposé avec éclisses pour la rotation articulaire du poignet et la flexion de la cheville, du genou et de la hanche.

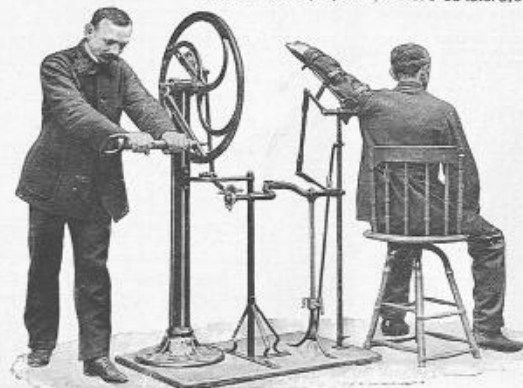


Fig. 985.

Appareil passif disposé avec éclisse pour élévation de l'épaule.

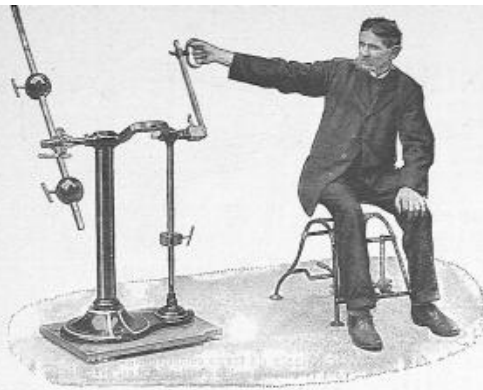


Fig. 986. — Appareil à pendule pour mouvements actifs. Roulement articulaire de l'épaule (Rotation du bras).

Appareil Actif

Nu sans éclisses

Prix * 315 francs.

Dans tous les cas, la dépense d'achat de ces appareils sera considérablement moins forte que s'il s'agissait d'appareils de toute autre marque connue, et cependant, nous insistons bien sur ce point : les appareils KNOCK et DRESSLER ne le cèdent en rien aux meilleurs, soit au point de vue de l'efficacité pratique, de la solidité de construction ou de la sûreté précise du fonctionnement.

L'explication de leur prix abordable, exceptionnel, la voici :

D'abord, les constructeurs ont su éviter les mécanismes compliqués, les engrenages multiples qu'on remarque sur certains appareils, assurément remarquables au point de vue mécanique, mais excessivement coûteux. Ensuite, le succès a permis la fabrication par grandes séries.

Enfin, le taux du bénéfice industriel et commercial a été fixé avec modération, et l'exploitation de ces appareils reste indemne de dessous financiers.

MM. les Docteurs que la question de la Mécanothérapie intéresse voudront bien s'adresser à nous avec confiance.

Nous leur enverrons, gratuitement, catalogues, devis et tous renseignements désirables sur les excellents appareils préconisés ici.

Il nous a paru que les applications mécanothérapeutiques devront se généraliser dans notre pays aussi largement que dans les contrées voisines, et que les médecins français trouveront là un élément fructueux fort justement apprécié de leurs confrères à l'étranger.

**ENVOI DU CATALOGUE DÉTAILLÉ
SUR DEMANDE**

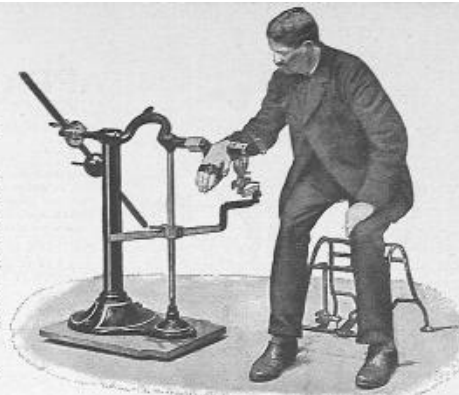


Fig. 987. — Appareil à pendule pour mouvements actifs. Flexion articulaire du poignet.



Fig. 989. — Appareil à pendule pour mouvements actifs. Flexion latérale du corps.



Fig. 988. — Appareil à pendule pour mouvements actifs. Rotation articulaire de la hanche.



Fig. 369.

APPAREILS contre l'ONANISME

Appareil contre l'onanisme sexe masculin (fig. 369)
 avec godet nickelé. 110 * 120 *
 — argent 150 * 180 *

Appareil contre l'onanisme avec ceinture cuir
 moule et godet argent doré. 280 *

Appareil contre l'onanisme sexe féminin.
 (fig. 370). Enfant 100 * 110 *
 — argent 140 * 170 *

Appareil contre l'onanisme avec ceinture
 cuir moulé et godet argent doré 270 *

Gants contre l'onanisme pour enfants, en crin blanc très dur, tricoté, garniture soie intérieure et lacets pour serrer aux poignets, la paire 10 *

MESURES : Donner la circonférence du bassin, la circonférence des cuisses, l'âge et le sexe du sujet. Pour les garçons, donner la longueur de la verge, la hauteur et la circonférence des parties.



Fig. 370.

CAMISOLE de FORCE

Corsage de force ne prenant que le buste et les bras 28 *

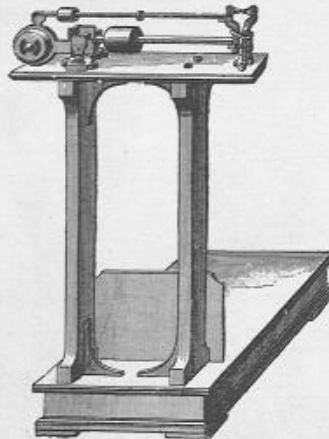


Fig. 373.

MAILLOTS pour AGITÉS

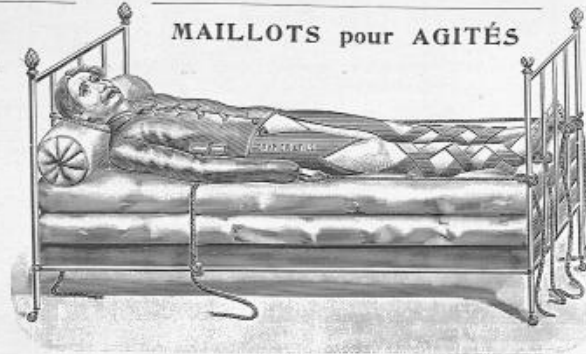


Fig. 372.

Camisole de force complète (fig. 372) prenant le buste, les bras et les jambes, avec lien en croix 85 *

Maillet en forte toile pour délirants, agités inconscients, modèle du Dr Marie. 100 *

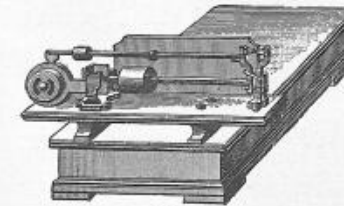


Fig. 371.

BASCULES de PRÉCISION pour CABINET MÉDICAL

Sensibles à 10 grammes.

Bascules de précision avec triangles en fer forgé. — Curseur et index en cuivre. — Tablier monté sur brides mobiles. — Coussinets de brides, chapes et couteaux en acier trempé. — Fléau et réglettes en acier.

Petit modèle transportable (Poids 15 kg. 500; fig. 371) : = 105 *
 Tablier de 42 x 35. Force 100 kilos. = 110 *
 — 45 x 35. — 120 — = 125 *
 Modèle avec appareil démonstratif à 0 m. 90 du sol (fig. 373) :
 Tablier de 45 x 35. Force 100 kilos. = 140 *
 — 120 — = 140 *

TOISES

Toise Féraud pour cabinet médical, s'accrochant au mur, avec ruban métrique en soie 16 *

————— 50

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

TABLE DES MATIÈRES

<p style="text-align: center;">A</p> <p>Accessoires pour ceintures 23</p> <p>Acoustiques 40</p> <p>Aéro-filtres 40</p> <p>Air chaud 43</p> <p>Alèzes 32</p> <p>Allaitement 39</p> <p>Albuminimètre 42</p> <p>Ampoules du Dr Bourget 37</p> <p>Antiphones 40</p> <p>Analyse du sucre 42</p> <p>Anteversion 34</p> <p>Appendicite (ceinture pour) 23</p> <p>Appareils en peau de chien</p> <p>— pour hémorroïdes 30</p> <p>— pour anus iliaque 30</p> <p>— pour fistule biliaire 30</p> <p>— pour fistule rénale 30</p> <p>— pour méat hypogastrique 30</p> <p>— en caoutchouc pour eczéma 33</p> <p>— pour la spermatorrhée 37</p> <p>— en crin 38</p> <p>— réfrigérants 38</p> <p>— électriques 44</p> <p>— de massage 44</p> <p>— de mécanothérapie 48</p> <p>— contre l'onanisme 50</p>	<p>Bandages cruraux 13</p> <p>— ombilicaux 14</p> <p>— précartement de la ligne blanche 15</p> <p>— pour enfants 16</p> <p>— pour ectopie testiculaire 17</p> <p>Bandes élastiques 28</p> <p>Bandes diverses 28</p> <p>— en caoutchouc 33</p> <p>Bas élastiques 25</p> <p>Bassins 31</p> <p>Bassins pour injections 26</p> <p>Bains d'air chaud 43</p> <p>Basculs de précision 50</p> <p>Béquilles (Voir le catalogue d'orthopédie)</p> <p>Bidets 36</p> <p>Biberons 30</p> <p>Bouteilles de corset 24</p> <p>— en caoutchouc 33</p> <p>Bonnets en caoutchouc 33</p> <p>Boîtes pour ventouses 33</p> <p>Bouillottes à eau chaude 38</p> <p>Bonnets à glace 38</p> <p>Bouts de seins 39</p> <p>Bocalrhine du Docteur Moura 40</p> <p>Bocaux gradués 42</p> <p>Boules pour massage 44</p> <p>Brassières 24</p> <p>Broc 35</p> <p>Brûleurs Guasco 40</p>	<p>Canules intestinales 37</p> <p>Camisoles de force 50</p> <p>Ceintures ombilicales 15</p> <p>Ceintures 16</p> <p>— de grossesse 18</p> <p>— pr relâchement des symphises 18</p> <p>— post-opératoire 23</p> <p>— abdominales 19</p> <p>— contre l'obésité 19</p> <p>— en caoutchouc pur 19</p> <p>— hypogastriques 20</p> <p>— maillot 21</p> <p>Chaussettes élastiques 27</p> <p>Chaussettes 33</p> <p>Chaussons en caoutchouc 33</p> <p>Corselets maillots 21</p> <p>Corsets-ceinture 22</p> <p>— de toilette 24</p> <p>— de grossesse 24</p> <p>— de sport 24</p> <p>Coussins en caoutchouc 52</p> <p>— bidets 33</p> <p>Compresseur prostatique 37</p> <p>Couveuses artificielles 39</p> <p>Compresseurs électriques 38</p> <p>Cornets acoustiques 40</p> <p>Conques acoustiques 40</p> <p>Collier-douche 43</p> <p>Crêpe (Bandes de) 28</p> <p>Croissants hypogastriques 23</p> <p>Crachoirs 42</p> <p>Cure radicale 23</p>	<p style="text-align: center;">E</p> <p>Ecartement de la ligne blanche 15</p> <p>Ectopie testiculaire 17</p> <p>Electricité 44</p> <p>Entéroptose 20</p> <p>Enémas 35</p> <p>Entéroclyse 37</p> <p>Eprouvettes 42</p> <p>Epididymite 29</p> <p>Escharres (coussins pour) 32</p> <p>Etuis de propreté 30</p> <p>Eversion 7-15</p> <p>Eczéma 30</p>
<p style="text-align: center;">B</p> <p>Bandages français 4</p> <p>— herniaires 3</p> <p>— inguinaux 4</p> <p>— anglais 11</p> <p>— pour hydrothérapie 12</p> <p>— pour climats tropicaux 12</p> <p>— pour suite d'opération 12</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p>Canules vaginales 35</p> <p>— spéculum 35</p> <p>— urétrales 36</p> <p>— vaginales pr injections à 45 degrés 36</p> <p>— pour irrigations rectales 36</p> <p>— à double-courant 36</p>	<p style="text-align: center;">D</p> <p>Dilatations 8</p> <p>Dilatateurs rectaux 37</p> <p>Douches pour injections 35</p>	<p style="text-align: center;">F</p> <p>Fauteuils pour malades 17</p> <p>Feuilles de pesée 39</p> <p>— de température 42</p> <p>Fistule biliaire 30</p> <p>— rénale 30</p> <p>Frappeur 46</p> <p>Fumigateurs 40</p>
			<p style="text-align: center;">G</p> <p>Gants en caoutchouc 33</p> <p>— de crin 37</p> <p>Garde-lait 39</p> <p>Gaveuse du P^r Tarnier 39</p> <p>Gants contre l'onanisme 50</p> <p>Genouillères élastiques 27</p> <p>— en peau de chien 28</p> <p>— pour douleurs 28</p> <p>— oustées 28</p> <p>— en peau de chat 28</p> <p>— en angora 28</p> <p>Goudronnières 40</p> <p>Gouttières (Voir catalogue d'orthopédie)</p>

H		Lance-poudre	41	Porte pommade rectale	37	T	
Hernies inguinales		Lavage d'estomac	42	Poires de Politzer	41	Tétrelles	39
— inguino-scrotales	6	Lits mécaniques	17	Prolapsus utérin	34	Thermomètres maxima	42
— scrotales	6	M		Pose abdominale	41	— de bains	42
— épipléiques	6	Maillots élastiques	21	Pulvérisateurs	41	Thermo-bain	43
— avec proèses	9	Matelas en caoutchouc	31	R		Tissus élastiques	26
— irréductibles	6	Masques en caoutchouc	33	Reins mobiles	20-23	Tire-lait	39
— crurales	13	Masticateurs	42	Rétroversion	34	Toile caoutchoutée	31
— ombilicales	14	Masseurs	44	Releveurs utérins	34	Toises	50
— épigastriques	15	Massage vibratoire	46-47	Respirateurs	40	Tubes à essai	42
Hémorroïdes	30	Maillots pour agités	50	Réveil muscle	40	Tub	43
Hochets du D ^r Liébault	39	Méatypogastrique	30	Rouleaux-masseurs	45	U	
Hydrocèle	29-30	Mécanothérapie	48	S		Urinaux	31
Hydrothérapie	43	Molletières élastiques	27	Sangles abdominales	20	V	
I		Moteurs électriques	27	Sacs à eau chaude	38	Varices (Bas pour)	25
Inhalateurs	40	Mobilier chirurgical. (Demander le catalogue spécial)	47	Scariificateurs	33	Varicocele	29
Irrigateurs	37	O		Seins artificiels	24	Ventouses	33-39
Instruments de chirurgie (Demander le catalogue spécial),		Orchite	30	Seringues nasales	41	Vessies à glace	38
L		P		Siège-bidet	36	Verrerie graduée	42
Laparotomie (ceintures pour)	23	Pelotes pour le rein	23	Siphons de Weber	41	Verres gradués à pied	42
Lampes pour ventouses	33	Pessaires	34	Sismothérapie	47	Vide bouteilles	35
Laveurs	35	Pèse-bébés	36	Sous-cuisses	23	Voitures pour malades	17
— du D ^r Dalché	36	Pompes pour ventouses	37	Soutien-gorge	24		
Lavement	37	Poires pour lavement	37	Spéculums	35		
Lanières en crin	37			Spermatorrhée	37		
				Sterilisateurs	39		
				Surdité	40		



Fig. 1760



Fig. 1468

**Envoi sur demande du Catalogue
d'Instruments de Chirurgie et Mobilier chirurgical.**

Imprimerie CHANTENAY, 15, rue de l'Abbé-Grégoire, Paris.

CONDITIONS DE VENTE



Les prix du présent Catalogue annulent les précédents.

Les ventes ont toujours lieu au comptant pour Paris et des arrhes sont demandées pour l'exécution des commandes.

Pour la Province et l'Étranger, lorsque le montant n'est pas joint à la lettre de commande, les appareils sont adressés contre remboursement. Les frais de retour d'argent sont à la charge du Client.

Le port et l'emballage sont toujours aux frais du Client et l'expédition faite à ses risques et périls. Les emballages ne sont pas repris. Nous engageons nos Clients à vérifier les colis à la réception afin de faire des réserves écrites s'il y avait lieu, avant de signer aucun récépissé aux transporteurs, qui sont responsables.

Dans les cas où les mesures fournies seraient erronées et entraîneraient un changement partiel ou total, les modifications sont aux frais du Client.

Sur demande nous pouvons envoyer des essayeurs ou essayeuses en Province ou à l'Étranger, dans ce cas nous comptons nos frais de déplacement et une indemnité variable selon la distance.

Les matières premières étant sujettes à de fréquentes variations, les prix du présent Catalogue peuvent être modifiés pour cette raison sans autre avis.

